

Pairing der Smartphone-App

Mit der App kann der Benutzer den Gesamtkilometerstand, die zurückgelegte Strecke, den Batteriestand und die vollen Ladezyklen überprüfen und die Fernsteuerungsfunktion nutzen. Zudem kann der Benutzer das Gerät ver- und entriegeln.

1. Sie müssen zunächst die App installieren. Öffnen Sie dazu den App Store, und suchen Sie nach „WHILL“. Klicken Sie auf das blaue WHILL Logo für die WHILL Modell C2/F-App. (Das graue Logo ist für das WHILL Modell C.)



2. Um Ihr Gerät zu pairen, starten Sie die WHILL Modell C2/F-App und geben Sie auf dem Display die folgenden Codes* ein oder scannen Sie den QR-Code.*

- 🔑 11-stelliger alphanumerischer Code
- 🔑 Passwort

*Die einmalige App-Pairing-ID und das Passwort sowie der QR-Code werden auf einen Papierstreifen gedruckt und in den Karton mit den Armlehnen gelegt.
Hinweis: Beachten Sie, dass die App je nach Ihrer Region oder Ihrem Smartphone-Typ eventuell nicht oder mit eingeschränktem Funktionsumfang angeboten wird.

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde, nimmt Anfragen zu Reparaturen, Instandhaltung/Wartung und zum Auswechseln von Teilen entgegen.

Händler

Hersteller WHILL, Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan

Bedienungsanleitung

WHILL Modell F



Diese Bedienungsanleitung enthält Hinweise zum allgemeinen Gebrauch des Geräts. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um das Gerät sicher zu handhaben. Zudem empfiehlt sich, diese Anleitung zum Nachschlagen jederzeit griffbereit zu haben.

1. Wichtige Sicherheitshinweise für den Gebrauch



Das WHILL Modell F ist eine Mobilitätshilfe. Personen, denen die Bedienung eines Elektrorollstuhls schwerfällt, sollten vom Gebrauch des Geräts Abstand nehmen.

- Die maximale Traglast dieses Geräts beträgt etwa 115 kg. Diese Last bezieht sich auf den Insassen und das eventuell mitgeführte Gepäck. Achten Sie darauf, dass die maximale Traglast beim Gebrauch nicht überschritten wird.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Ein- und Aussteigen aus.
- Halten Sie Ihre Füße beim Fahren auf der Fußauflage, damit Füße oder Kleidung nicht in den beweglichen Teilen eingeklemmt werden.
- Meiden Sie stark frequentierte und enge Bereiche, und befolgen Sie die Straßenverkehrsvorschriften, um sicher unterwegs zu sein.

Achten Sie darauf, für das Fahren angemessene Kleidung zu tragen.


- Es besteht die Gefahr, dass sich Kleidung, wie lange Schals, weite Hosen, Röcke und Regenmäntel in den Rädern oder anderen Teilen des Geräts verfangen, wodurch Verletzungen entstehen können.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, achten Sie darauf, dass sie sich nicht im Gerät verfangen und beispielsweise zwischen die Bedienelemente geraten.

Fahren Sie in folgenden Bereichen besonders vorsichtig.

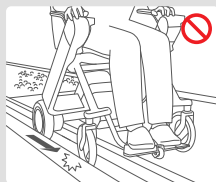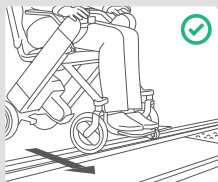

Wenn Sie Bahnübergänge oder Straßenbahnschienen überqueren, fahren Sie gerade darauf zu, und kreuzen Sie die Schienen lotrecht.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Schienenrinne stecken bleibt.

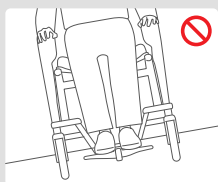

Befahren Sie kein Gelände, in dem das Gerät einer starken Neigung ausgesetzt ist.


Vermeiden Sie Bahnübergänge und wählen Sie stattdessen möglichst sichere Wege. Wenn Sie einen Bahnübergang überqueren müssen, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie die Bremsen (p4) manuell zu lösen sind, und bitten Sie jemanden, Sie zu begleiten.

Fahren Sie das Gerät nicht auf unbefestigtem Untergrund, wie Sand, Matsch, Schnee oder gefrorene Wege. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich ein Unfall ereignet.

Das Gerät ist nicht sicher in Magnetresonanz-Umgebungen (MR). Das WHILL Modell F ist nicht MR-sicher. Das Gerät stellt eine Projektilgefahr dar.



2. Grundlegende Betriebsabläufe

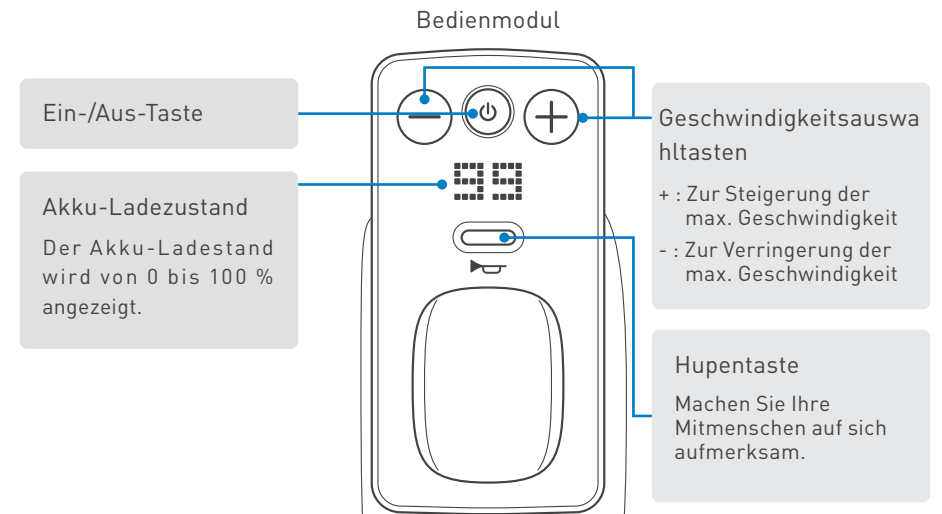

- 1 Einstieg** Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie in das Gerät einsteigen.
 - 2 Schalten Sie die Stromversorgung ein.** Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste und überprüfen Sie, dass sich das Display einschaltet.
 - 3 Einstellen der Geschwindigkeit** Die Geschwindigkeit lässt sich mit Hilfe der Geschwindigkeitswahl-tasten von 1 bis 4 einstellen.
 - 4 Fahren und Richtungswechsel** Bewegen Sie den Joystick langsam in die gewünschte Richtung.
 - 5 Anhalten** Lassen Sie den Joystick los.
 - 6 Schalten Sie die Stromversorgung aus.** Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste und überprüfen Sie, dass sich das Display ausschaltet.
 - 7 Steigen Sie aus** Wenn das Display ausgeschaltet ist, können Sie das Gerät verlassen.
- ! Achten Sie vor dem Ein- und Aussteigen darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.**

2. Fahrtipps Grundlegende Betriebsabläufe

1 Anhalten

Lassen Sie den Joystick los, um das Gerät anzuhalten. Wenn Sie den Joystick loslassen, werden automatisch die Bremsen angezogen, um das Gerät auch an einer Steigung oder an einem Gefälle zum Stillstand zu bringen.

2 Halten des Joysticks

Legen Sie Ihre Finger auf den Joystick.



3 Steuerung des Joysticks

Regelung der Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit des Geräts kann durch den Neigungsgrad des Joysticks geregelt werden. Achten Sie in der Eingewöhnungszeit darauf, den Joystick vorsichtig zu bedienen und langsam zu fahren.




Kleiner Neigungswinkel
= langsam



Größerer Neigungswinkel
= schnell

Fahren über eine Schwelle
Wenn Sie über eine Schwelle fahren, achten Sie darauf, dass Sie gerade auf die Schwelle zufahren.

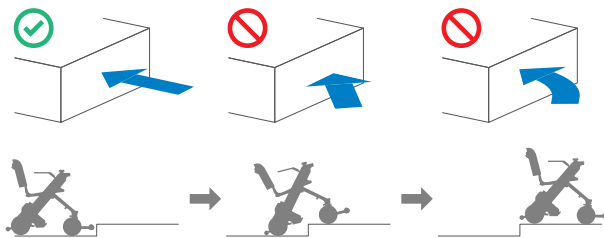

Bremsen Sie ab, nachdem die Vorderräder über die Schwelle gefahren sind.

Halten Sie an, wenn die Vorderräder gegen die Schwelle stoßen.

Bremsen Sie ab, nachdem die Vorderräder über die Schwelle gefahren sind.

Wiederholen Sie den Vorgang mit beiden Hinterrädern, um die Schwelle zu überfahren.

3. Lösen der Bremsen

In bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, das Gerät zu steuern, ohne es einzuschalten und den Joystick zu verwenden – dies wird als Freilaufbetrieb bezeichnet. Dabei kommen die beiden roten Bremshebel zum Einsatz.

Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die beiden Bremshebel unter dem Sitzgestell nach unten.



Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben, um die Bremsen anschließend wieder festzustellen.

! Lösen Sie die Bremsen nicht am Gefälle. Stellen Sie sicher, die Bremsen nur dann zu lösen, wenn Sie auf ebenem Untergrund stehen, und in Notfällen nach dem Abschalten des Geräts. Denken Sie nach dem Schieben des Geräts bei gelösten Bremsen daran, die beiden Bremshebel anzuziehen, um die Bremsen wieder festzustellen.

4. Zusammen- und Auseinanderklappen

Das Modell F ist klappbar.

!

- Klappen Sie das Gerät auf ebenem Untergrund zusammen. Andernfalls kann es zu einem Unfall kommen.
- Stellen Sie die Bremsen fest, bevor Sie das Gerät zusammenklappen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich das Gerät unbeabsichtigt in Bewegung setzt, was zu einem Unfall führen kann.
- Halten Sie das Gerät nur an den Griffen und Teilen fest, wie in der Abbildung gezeigt. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Hand im Gerät eingeklemmt und verletzt wird.



1 Neigen Sie die Rückenlehne zum Sitz.



2 Fixieren Sie das Gerät und stützen Sie dabei das Fußpedal.



Stützen Sie das Fußpedal, das die beiden Anti-Kipp-Rollen verbindet, um zu verhindern, dass sich das Gerät beim Zusammenklappen bewegt.

! Es besteht die Gefahr von Fußverletzungen, wenn der Fuß beim Zusammenklappen unter dem Pedal eingeklemmt wird.

3 Drücken Sie die Entriegelungstaste



Die Entriegelungstaste befindet sich an der Vorderseite des rechten Stützarms. Halten Sie das Gerät in diesem Zustand mit eingedrückter Entriegelungstaste.

4 Ziehen Sie das Sitzgestellrohr leicht nach oben.



Fassen Sie das Sitzgestellrohr an der Rückseite des Sitzes und ziehen Sie es nach oben, während Sie die Entriegelungstaste gedrückt halten.



Wenn das Gerät beginnt, zusammenzuklappen, nehmen Sie Ihre Hand von der Entriegelungstaste.

5 Klappen Sie das Gerät zusammen.



Klappen Sie das Gerät so weit zusammen, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Drücken Sie abschließend noch einmal vorsichtig auf das Sitzgestellrohr, um sich zu vergewissern, dass das Gerät richtig verriegelt ist und sich nicht öffnen lässt.

! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nach dem Zusammenklappen richtig verriegelt ist, damit es sich nicht unerwartet öffnen kann.

5. Auseinanderklappen des Geräts



- Klappen Sie das Gerät auf ebenem Untergrund auseinander.
- Stellen Sie die Bremsen fest, bevor Sie das Gerät auseinanderklappen.
- Halten Sie das Gerät beim Zusammen- und Auseinanderklappen grundsätzlich an den Griffen und Teilen fest, wie in der Abbildung gezeigt.

1 Fixieren Sie das Gerät und stützen Sie dabei das Fußpedal.



Stützen Sie das Fußpedal, das die beiden Anti-Kipp-Rollen verbindet, um zu verhindern, dass sich das Gerät beim Auseinanderklappen bewegt.

2 Ziehen Sie das Sitzgestellrohr nach oben und drücken Sie auf die Entriegelungstaste.



Fassen Sie das Sitzgestellrohr an der Rückseite des Sitzes und ziehen Sie es nach oben, damit das Gerät in diesem Zustand bleibt.



Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Vorderseite des rechten Stützarms.

Die Entriegelungstaste ist so konzipiert, dass sie nur gedrückt werden kann, wenn das Sitzgestellrohr nach oben gezogen wird.

3 Ziehen Sie das Sitzgestellrohr nach unten.




Senken Sie das Sitzgestellrohr ab und halten Sie dabei die Entriegelungstaste gedrückt, um das Gerät auszuklappen. Wenn das Gerät beginnt, auseinanderzuklappen, nehmen Sie die Hand von der Taste.

4 Klappen Sie das Gerät auseinander.



Klappen Sie das Gerät so weit auseinander, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

5 Neigen Sie die Rückenlehne nach hinten und überprüfen Sie die Verriegelungsanzeige.

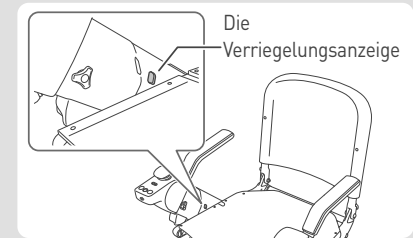

Achten Sie darauf, dass die Verriegelungsanzeige an der Innenseite des rechten Stützarms schwarz ist.



Achten Sie darauf, dass die Verriegelungsanzeige nach dem Ausklappen des Geräts schwarz ist, um zu verhindern, dass das Gerät während der Fahrt unbeabsichtigt einklappt, was zu einem Unfall führen kann.

6. Aufladen der Batterie

1 Aufladen der Batterie im Gerät


Bewegen Sie das Gerät an eine Steckdose heran und schalten Sie das Gerät aus. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Wechselstrom-Anschlusskabel.

Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Die Ladegerätanzeige leuchtet rot auf.

Entfernen Sie die Kappe vom Batterie-Ladeanschluss und verbinden Sie den Gleichstrom-Stecker mit dem Batterie-Ladeanschluss. Die Ladestandsanzeige beginnt, grün zu blinken, und der Ladevorgang beginnt.

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Ladestandsanzeige durchgehend grün leuchtet.

Trennen Sie den Gleichstrom-Steckverbinder von der Batterie und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Setzen Sie die Kappe auf die Batterie-Ladebuchse.

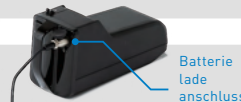

2 Externes Aufladen der Batterie

Überprüfen Sie, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und betätigen Sie die Batterie-Freigabetaste. Nehmen Sie den Griff zur Hand und ziehen Sie an ihm, um die Batterie herauszunehmen.

Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Wechselstrom-Anschlusskabel. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

Entfernen Sie die Kappe vom Batterie-Ladeanschluss und verbinden Sie ihn mit dem Gleichstrom-Steckverbinder. Die Ladegerätanzeige beginnt, grün zu blinken, und der Ladevorgang beginnt.

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Ladestandsanzeige und die Batterie-LED durchgehend grün leuchten.

Trennen Sie den Gleichstrom-Steckverbinder von der Batterie und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



- Die Batterie und das Ladegerät dürfen während des Ladevorgangs nicht berührt werden, um Verbrennungen zu verhindern.
- Die Batterie muss grundsätzlich im Innenbereich aufgeladen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die Batterie und das Ladegerät, die für das Gerät vorgesehen sind.

7. Fehlerbehebung

Im Falle einer Störung oder Fehlfunktion des Geräts wird auf dem Display ein Fehlercode angezeigt. Wenn ein nicht aufgeführter Fehler angezeigt wird oder wenn das Problem weiter bestehen bleibt, obwohl ein Problem gemäß den Anleitungen zur Fehlerbehebung behandelt wurde, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst.

Verhalten des Geräts	Fehlercode	Ursache	Lösung
Es erscheint das rechts stehende Symbol.		Die Steuerung wird betätigt, während sich das Gerät im zusammengeklappten Zustand befindet.	Entriegeln Sie das Gerät und schalten Sie das Gerät wieder ein.
		Der Joystick befindet sich beim Einschalten nicht in der Neutralstellung.	Schalten Sie das Gerät erneut ein, ohne den Joystick zu betätigen.
		Die Bremshebel sind gelöst.	Stellen Sie die Bremsen fest und schalten Sie das Gerät wieder ein.
		Das Ladegerät wurde angeschlossen, während das Gerät eingeschaltet war, oder das Gerät wurde eingeschaltet, während das Ladegerät angeschlossen war.	Trennen Sie das Ladegerät vom Akku.
		Der Batterieladestand ist niedrig.	Laden Sie die Batterie auf.
Die Höchstgeschwindigkeit sinkt.		Die Batterietemperatur ist deutlich gesunken.	Bewahren Sie die Batterie bei Raumtemperatur oder mindestens bei einer Umgebungstemperatur über 0 °C auf, bis die Batterietemperatur auf über 0 °C ansteigt.
Die maximale Geschwindigkeit wird wieder hergestellt.		Die Batterietemperatur ist auf über 0 °C angestiegen.	Bewahren Sie die Batterie bei Raumtemperatur oder mindestens bei einer Umgebungstemperatur über 0 °C auf, bis die Batterietemperatur auf über 0 °C ansteigt.
Es erscheint das rechts stehende Symbol.		Der Ladestand der Smart-Key-Batterie ist niedrig.	Wechseln Sie die Funkschlüssel-Batterie aus.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Die LED-Anzeige leuchtet nicht.	N. z.	Der Akku-Ladezustand ist niedrig.	Laden Sie den Akku auf.
		Der Akku ist nicht vollständig in das Akkufach an der hinteren Antriebseinheit eingesetzt.	Setzen Sie den Akku vollständig ein. Nehmen Sie den Akku heraus und schieben Sie ihn nach 10 Sekunden wieder ein.
		Der Kabelstecker an der Rückseite des Sitzes ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Kabelstecker an.