

Parowanie z aplikacją na smartfona

Aplikacja umożliwia użytkownikom sprawdzanie całkowitego przebiegu, przebytej odległości, poziomu naładowania akumulatora, cykli pełnego naładowania oraz korzystanie z funkcji zdalnego sterowania. Użytkownicy mogą również zablokować i odblokować urządzenie.

1. Aplikację należy zainstalować wcześniej. Aby ją zainstalować, przejdź do App Store i wyszukaj „WHILL”. Kliknij niebieską ikonę z logo WHILL, aby wybrać aplikację WHILL dla modelu C2. (Szara ikona logo jest przeznaczona dla modelu C urządzenia WHILL).



2. Aby sparować urządzenie, uruchom aplikację WHILL dla modelu C2 i wprowadź następujące kody* na ekranie.

- 🔑 11-cyfrowy kod alfanumeryczny
- 🔑 hasło

*Na pasku papieru umieszczonym we wgłębieniu w siedzisku urządzenia wydrukowane są dwa kody.

Uwaga: W zależności od regionu i typu smartfona aplikacja może być niedostępna lub niektóre funkcje mogą nie działać.

Zgłoszenia naprawy, konserwacji i wymiany części obsługiwane są przez dystrybutora, u którego dokonano zakupu urządzenia.

Dystrybutor

Producent WHILL, Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japonia

www.whill.inc

Instrukcja obsługi

WHILL Model C2



Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zaleca się przechowywanie tej instrukcji w zawsze dostępnym miejscu.

1. Główne środki ostrożności podczas użytkowania


WHILL Model C2/CK2 to pojazd wspomagający poruszanie. Osoby, które mają trudności z obsługą elektrycznego wózka inwalidzkiego, nie powinny używać tego urządzenia.

- Maksymalne obciążenie tego urządzenia wynosi 300 lb (ok. 136 kg). Dotyczy to łącznej wagi użytkownika i bagażu. Podczas użytkowania upewnij się, że ciężar ładunku nie przekracza wartości maksymalnej.
- Wyłącz zasilanie urządzenia podczas wsiadania i zsiadania.
- Podczas jazdy trzymaj stopy na podnóżku, aby uniknąć zahaczenia stopami lub ubraniem o ruchome elementy.
- Unikaj ruchu ulicznego i wąskich przestrzeni oraz przestrzegaj zasad ruchu drogowego, aby jeździć bezpiecznie.

Ubierz się odpowiednio do warunków jazdy.


- Elementy odzieży takie jak długie szale, luźne spodnie, spódnice i płaszcze przeciwdeszczowe mogą zostać wciągnięte przez opony lub inne części urządzenia, powodując obrażenia.
- Jeśli nosisz rękawice, uważaj, aby nie zaczepiły się one o urządzenie, np. o elementy sterujące.

W następujących miejscach zachowaj ostrożność.

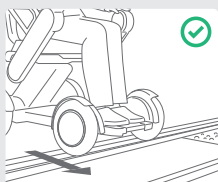

w przypadku przejeżdżania przez tory kolejowe lub tramwajowe, zbliżaj się do nich i przekraczaj je prostopadle.

Uważaj, aby urządzenie nie utknęło w rowku szyn.

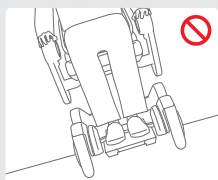


Nie należy jeździć w miejscach, gdzie urządzenie może się znacznie przechylić.

Unikaj przejazdów kolejowych i wybieraj bezpieczniejszą trasę, kiedy tylko jest to możliwe.



Jeśli musisz przejechać przez przejazd kolejowy, upewnij się, że wiesz, jak ręcznie zwolnić hamulce (str. 4) i poproś opiekuna o pomoc. Nie należy jeździć po terenach o miękkiej nawierzchni, takich jak piasek, błoto, śnieg lub zamarznięte ścieżki. Stwarza to ryzyko wypadku.

2. Podstawowe czynności

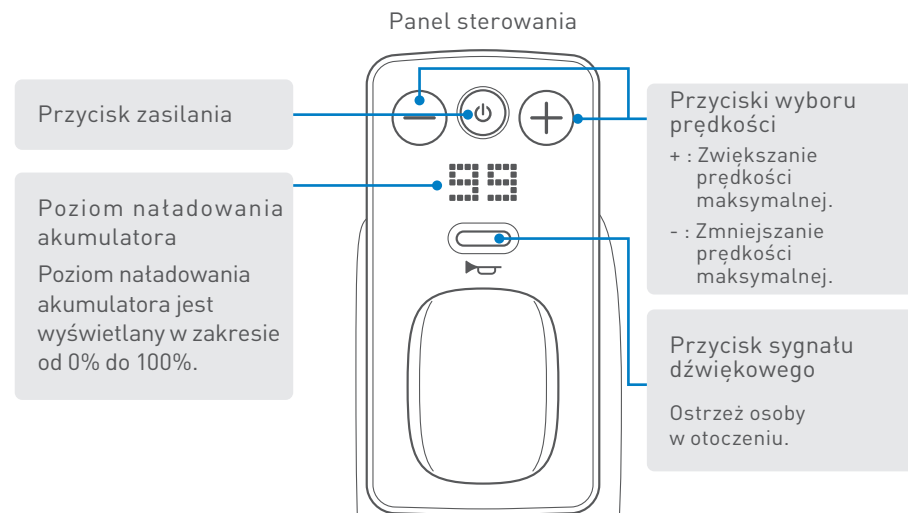

- 1 Wsiadanie** Zanim usiądziesz, upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone.
- 2 Włączanie zasilania** Naciśnij przycisk zasilania i upewnij się, że wyświetlacz jest włączony.
- 3 Ustawianie prędkości** Ustaw prędkość od 1 do 4 za pomocą przycisków wyboru prędkości.
- 4 Jazda i skręcanie** Powoli przesunij joystick w żądanym kierunku.
- 5 Zatrzymanie** Zwolnij joystick.
- 6 Wyłączenie zasilania** Naciśnij przycisk zasilania i upewnij się, że wyświetlacz jest wyłączony.
- 7 Zsiadanie** Zanim zsiądziesz, upewnij się, że wyświetlacz jest wyłączony.



Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie urządzenia podczas wsiadania i zsiadania.

2. Wskazówki dotyczące jazdy Podstawowe czynności

1. Zatrzymanie

Aby się zatrzymać, zwolnij joystick. Zwolnienie joysticka powoduje automatyczne uruchomienie hamulców i zatrzymanie urządzenia nawet na zbieżni lub wzniesieniu.

2. Trzymanie joysticka

Umieść palce na joysticku.



3. Operowanie joystickiem

Regulacja prędkości


Prędkość można regulować, zmieniając wychylenie joysticka. Na początku wykonaj delikatny ruch joystickiem i jedź powoli.



Niewielkie przechylenie = powoli Większe przechylenie = szybko

Wjeżdżanie na stopień

Podjedź pod kątem prostym do stopnia, na który chcesz wjechać.

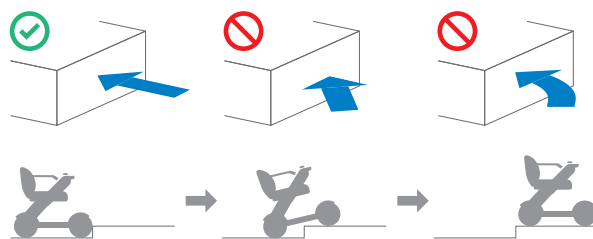

Zatrzymaj się, gdy przednie koła dotkną stopnia.


Zwolnij, gdy przednie koła pokonają stopień.

Zrób to samo z tylnymi kołami, aby pokonać stopień.

3. Zwalnianie hamulców

Niektóre sytuacje mogą wymagać sterowania urządzeniem bez włączenia zasilania i używania joysticka – jest to tzw. tryb wolnego koła. Jest to możliwe przy użyciu dwóch czerwonych dźwigni zwalniania hamulców.

Wyłącz zasilanie urządzenia. Naciśnij w dół obie dźwignie zwalniania hamulca poniżej siedziska.

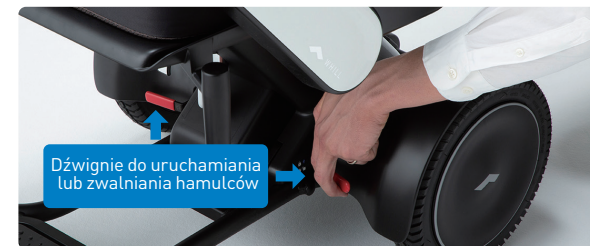

Podnieś obie dźwignie zwalnijające hamulce, aby ponownie włączyć hamulce.



Nie zwalnij hamulców na pochyłości. Hamulce można zwolnić tylko na płaskiej powierzchni oraz w sytuacjach awaryjnych, po wyłączeniu zasilania. Po ręcznym przemieszczeniu urządzenia ze zwolnionymi hamulcami podnieś obie dźwignie zwalnijające hamulce, aby ponownie włączyć hamulce.

4. Używanie klucza inteligentnego

Klucz inteligentny służy do blokowania i odblokowywania urządzenia.



Naciśnij przycisk blokady na kluczu inteligentnym.

Na wyświetlaczu sterownika pojawi się ikona wskazująca stan zablokowania i zabrzmie dźwięk blokady. Przy próbie włączenia urządzenia, gdy jest ono zablokowane, na wyświetlaczu pojawi się ikona wskazująca stan zablokowania. Urządzenia nie można włączyć.

Naciśnij przycisk wyłączenia blokady na kluczu inteligentnym.

Dioda LED klucza inteligentnego zaświeci się, a na wyświetlaczu pojawi się ikona wskazująca stan odblokowania i zabrzmie dźwięk odblokowania. Urządzenie zostanie odblokowane.

Sprzedawane oddzielnie. Wyposażone w standardowe elementy w zależności od obszaru/kraju.

5. Sposób demontażu

! Podczas montażu lub demontażu urządzenia chwyć tylko za uchwyty i części opisane w instrukcji i nie trzymaj urządzenia za żadne inne części.

To urządzenie można rozłożyć na następujące pięć komponentów.

※ Przed demontażem należy wyjąć akumulator.



1 Demontaż akumulatora



Naciśnij przycisk zwalniający blokadę akumulatora. Chwyć za uchwyt i pociągnij, aby wyjąć akumulator.



2 Demontaż zespołu siedziska



Podnieś dźwignię zwalnającą siedzisko do góry.



Podnieś zespół siedziska, trzymając za podtokiećniki.

※ Podnieś zespół siedziska powoli, tak aby nie uszkodzić innych części.

※ Układając zespół siedziska na podłogę, umieść go poduszką skierowaną do góry.



Podczas podnoszenia zespołu siedzenia pole elektromagnetyczne złączy magnetycznych znajdujących się w miejscu potężenia zespołu siedzenia z podstawą tylnego napędu może mieć niekorzystny wpływ na elektryczne urządzenia medyczne. Osoby, które mają wszczepiony rozrusznik serca, defibrylator lub inne elektryczne urządzenia medyczne, muszą zachować odległość co najmniej 20 cm (8 cali) od złączy magnetycznych.

3 Demontaż kosza transportowego

Opróżnij kosz transportowy, a następnie podnieś go prosto do góry, trzymając za uchwyty i wyjmij go z przedniej podstawy napędu.

4 Odłączanie podstawy napędu przedniego



Unieś dźwignię zwalniania podstawy.




Chwyć uchwyt znajdujący się w pobliżu środka podstawy przedniego napędu i odłącz pręt B na jednym końcu podstawy od zaczepu podstawy tylnego napędu.



* Podczas demontażu podeprzyj ręką podstawę tylnego napędu, aby zapobiec jej przewróceniu.

6. Sposób montażu

1. Montaż przedniej i tylnej podstawy napędu

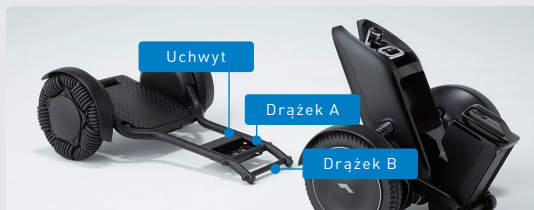

Chwyć uchwyt w pobliżu środka podstawy przedniego napędu, jednocześnie odchylając do góry podstawę tylnego napędu. Następnie dopasuj pręt B do zaczepu na podstawie tylnego napędu.




Powoli przechylił podstawę tylnego napędu do przodu i połącz ją z podstawą przedniego napędu. Uchwyt zwalniający podstawy tylnego napędu zatrzaskuje się na pręcie A podstawy napędu przedniego. Gdy obie części zostaną prawidłowo połączone, słychać będzie kliknięcie.

2. Mocowanie kosza transportowego



Ustaw zaczepy na spodzie kosza równo z ramą podstawy napędu przedniego, a następnie dociśnij kosz prosto w dół. Naciśnij płaską część na dole kosza, aż do jego zatrzaśnięcia.

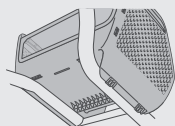


! Jeśli urządzenie nie uruchamia się prawidłowo pomimo włożenia do niego naładowanego akumulatora i włączenia urządzenia, wyjmij akumulator, a następnie włóż go ponownie po 10 sekundach.

3. Montaż zespołu siedziska



Wyjmij poduszkę siedziska, chwycąc za podłokietniki i podnieś zespół siedziska.

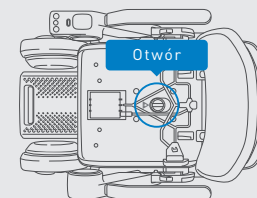

Korzystając z otworu widokowego, dopasuj i umieść zespół siedziska na podstawie siedziska.



Przesuń dźwignię zwalniającą siedzisko w dół do pozycji pionowej i przymocuj poduszkę z powrotem do podstawy siedziska.

4. Montaż akumulatora



Upewnij się, że przycisk zwalniania zatrzasku akumulatora nie jest wciśnięty. Trzymając za uchwyt, wsuń akumulator do komory. W razie trudności naciśnij akumulator z większą siłą.

7. Ładowanie akumulatora

1 Ładowanie, gdy akumulator jest zamontowany w urządzeniu

Przenieś urządzenie w pobliże gniazdka i wyłącz zasilanie urządzenia.
Podłącz ładowarkę i przewód zasilający AC.

Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
Wskaźnik ładowarki zaświeci się na czerwono.

Zdejmij zaślepkę portu ładowania akumulatora i podłącz do niego złącze zasilania DC.
Wskaźnik ładowarki zacznie migać na zielono. Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

Ładowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik ładowarki zaświeci się na zielono.

Odtłącz złącze zasilania DC od akumulatora, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. Załóż zaślepkę na port ładowania akumulatora.

2 Ładowanie, gdy akumulator jest zdemontowany z urządzenia

Sprawdź, czy zasilanie urządzenia jest wyłączone i naciśnij przycisk zwalniający blokadę akumulatora. Chwyć za uchwyt i pociągnij, aby wyjąć akumulator.

Podłącz ładowarkę i przewód zasilający AC. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

Zdejmij zaślepkę portu ładowania akumulatora i podłącz do niego złącze zasilania DC.
Wskaźnik ładowarki zacznie migać na zielono. Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

Ładowanie zostanie zakończone, gdy wskaźnik ładowarki i dioda LED akumulatora zaświecą się na zielono.

Odtłącz złącze zasilania DC od akumulatora, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.



- Nie dotykaj akumulatora i ładowarki podczas ładowania, aby zapobiec poparzeniom.
- Zapewnij, by ładowanie akumulatora odbywało się w pomieszczeniach zamkniętych.
- Akumulator i ładowarka są przeznaczone wyłącznie dla modelu WHILL C2.
- Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek przeznaczonych do tego urządzenia.

8. Rozwiązywanie problemów

Jeśli w urządzeniu wystąpi określony problem, na ekranie wyświetlony zostanie kod błędu. Jeśli wyświetlony zostanie błąd, którego nie ma na liście, lub problem nie ustąpi nawet po zastosowaniu procedury wymienionej w tabeli, należy skontaktować się z dystrybutorem lub działem obsługi klienta.

Zachowanie urządzenia	Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
Pojawia się ikona pokazana po prawej stronie.		Podjęto próbę obsługi panelu sterowania, gdy ramię jest obrócone do góry.	Opuścić ramię i ponownie włączyć zasilanie.
		Joystick nie był w pozycji neutralnej, gdy włączono zasilanie.	Ponownie włączyć zasilanie, nie dotykając joysticka.
		Dźwignie hamulca są zwolnione.	Aktywować hamulce i ponownie włączyć zasilanie.
		Ładowarka została podłączona, gdy zasilanie było włączone, lub urządzenie zostało włączone, gdy było podłączone do ładowarki.	Odtłączyć ładowarkę od akumulatora.
		Niski poziom naładowania akumulatora.	Naładować akumulator.
Prędkość maksymalna spadła.		Temperatura akumulatora znacząco spadła.	Umieścić akumulator w temperaturze otoczenia lub przynajmniej w temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) do czasu, aż jego temperatura wzrośnie powyżej 0°C (32°F).
Maksymalna prędkość zostanie przywrócona.		Temperatura akumulatora wzrosła powyżej 0°C (32°F).	
Pojawia się ikona pokazana po prawej stronie.		Niski poziom energii akumulatora klucza inteligentnego.	Wymienić akumulator klucza inteligentnego.
Pojawia się ikona pokazana po prawej stronie.		Urządzenie może znajdować się na stromym wzniesieniu.	Urządzenie może znajdować się na niebezpiecznej pochyłości. Przejeźdź powoli do miejsca, gdzie nachylenie jest łagodne, zwracając jednocześnie uwagę na swoje bezpieczeństwo. Dźwięk ostrzegawczy jest emitowany co około 2 minuty.



Jeśli urządzenie nie włącza się, sprawdź poziom naładowania akumulatora i czy jest on całkowicie włożony do komory. Jeśli urządzenie nie uruchamia się prawidłowo, wyjmij akumulator, a następnie włóż go ponownie po 10 sekundach i włącz urządzenie po 5 sekundach.