

Guía de funcionamiento

WHILL Modelo C2



Esta Guía de funcionamiento está destinada a proporcionar instrucciones sobre el uso básico del dispositivo. Para usar el dispositivo de manera segura, lea con atención esta guía antes del uso. Se recomienda mantener esta guía a mano en todo momento para su consulta.

Cómo emparejar la aplicación de su smartphone con el dispositivo

La aplicación permite a los usuarios comprobar el kilometraje total, la distancia recorrida, el nivel de la batería, los ciclos de carga completa y usar la función de control remoto. Los usuarios también pueden bloquear y desbloquear la unidad.

1. La aplicación debe instalarse previamente. Para instalarla, vaya a la App Store y busque «WHILL». Haga clic en el icono del logotipo azul de WHILL para la aplicación de WHILL Modelo C2. (El icono del logotipo gris es para el WHILL Modelo C)



2. Para emparejar su dispositivo, abra la aplicación de WHILL Modelo C2 e introduzca los siguientes códigos* en la pantalla.

- 🔑 Código alfanumérico de 11 dígitos
- 🔑 contraseña

*Los dos códigos están imprimen en la hoja de papel colocada en la ranura del asiento del dispositivo.
Nota: Según la región o el tipo de smartphone, es posible que la aplicación o algunas de sus funciones no estén disponibles.

El distribuidor al que se ha comprado el dispositivo se encargará de las solicitudes de reparación, mantenimiento y sustitución de piezas.

Distribuidor

Fabricante WHILL Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japón

1. Principales precauciones de uso


El WHILL Modelo C2/CK2 es un vehículo de movilidad. Las personas que tengan dificultades para usar una silla de ruedas eléctrica deben abstenerse de usar este dispositivo.

- El peso de carga máximo para este dispositivo es de 300 libras (136 kg aprox.). Este peso incluye tanto al ocupante como al equipaje. Asegúrese de que el peso de carga no supere el peso máximo durante el uso.
- Apague la alimentación del dispositivo al subir y al bajar del mismo.
- Mantenga los pies en el reposapiés mientras conduce para evitar que los pies o la ropa se enganchen en los componentes móviles.
- Evite el tráfico y los espacios estrechos y respete las reglas de tránsito para conducir de manera segura.

Vístase de manera adecuada para conducir.


- Existe el riesgo de que las prendas de vestir, como bufandas largas, pantalones sueltos, faldas y los abrigos de lluvia puedan enredarse en los neumáticos u otras partes del dispositivo, lo que puede causar lesiones.
- Cuando use guantes, tenga mucho cuidado para evitar que los guantes queden atrapados en el dispositivo, por ejemplo, en los componentes de control.

Conduzca con cuidado en las siguientes áreas.

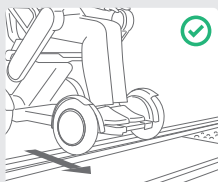

Al cruzar cruces ferroviarios o vías de tranvías, acérquese y cruce perpendicularmente a las vías.


Asegúrese de que el dispositivo no se atasque en las ranuras de las vías.

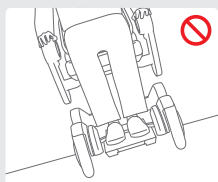

No conduzca en lugares en los que el dispositivo pueda inclinarse mucho.

Evite los cruces ferroviarios y tome un camino más seguro siempre que sea posible. Si tiene que pasar por un cruce ferroviario, asegúrese de saber cómo liberar los frenos manualmente (p4) y pídale a un cuidador que le acompañe. No conduzca el dispositivo en zonas con superficies blandas como arena, barro, nieve o caminos congelados. Existe el riesgo de que se produzcan accidentes.

2. Operaciones básicas

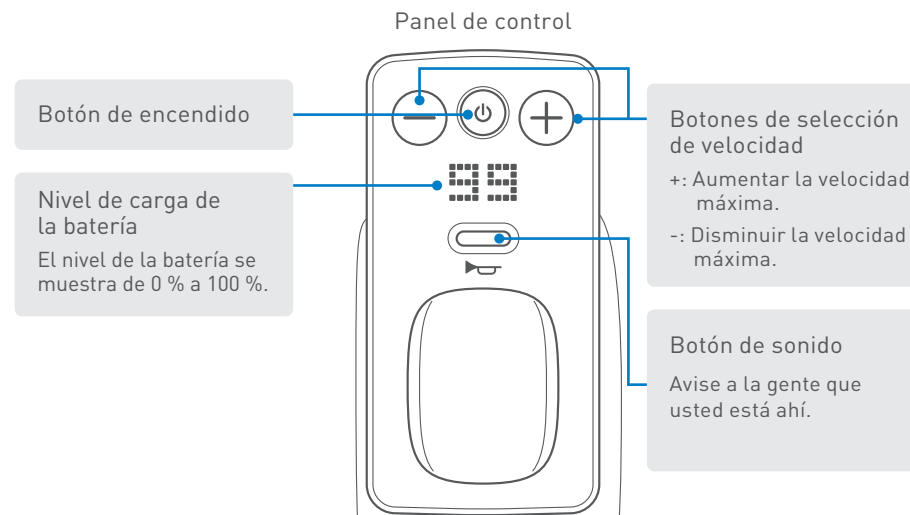

- 1 Subir al dispositivo** Compruebe que el dispositivo esté apagado antes de subir al mismo.
- 2 Encender el dispositivo** Presione el botón de encendido y compruebe que la pantalla se encienda.
- 3 Configurar la velocidad** Ajuste la velocidad de 1 a 4 utilizando los botones de selección de velocidad.
- 4 Moverse y girar** Mueva el joystick lentamente en la dirección deseada.
- 5 Detener el dispositivo** Suelte el joystick.
- 6 Apagar el dispositivo** Presione el botón de encendido y compruebe que la pantalla se apague.
- 7 Salir del dispositivo** Compruebe que la pantalla esté apagada y luego salga del dispositivo.

⚠ Asegúrese de apagar la alimentación del dispositivo al subir y al bajar del mismo.

2. Consejos de conducción Operaciones básicas

1. Cómo detener el dispositivo

Suelte el joystick para detener el dispositivo. Al soltar el joystick, se activan automáticamente los frenos y el dispositivo se detiene, incluso en una pendiente en subida o en bajada.

2. Cómo sujetar el joystick

Coloque los dedos en el joystick.



3. Cómo mover el joystick

Ajuste de la velocidad

La velocidad del dispositivo se puede controlar según el grado de inclinación del movimiento del joystick. Al principio, asegúrese de mover el joystick con suavidad y conducir lentamente.




Inclinar un poco = lentamente

Inclinar más = rápido

Subir un escalón

Para subir un escalón, acérquese en ángulo recto al escalón.

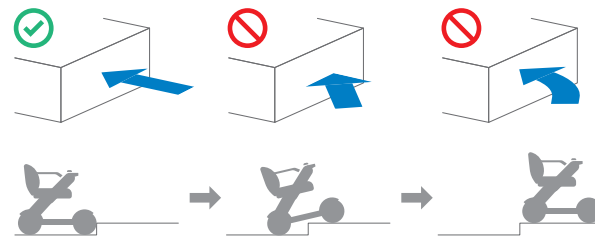

Deténgase cuando las ruedas delanteras choquen con el escalón.

Reduzca la velocidad después de que las ruedas delanteras hayan subido el escalón.

Haga lo mismo para las ruedas traseras, para que el dispositivo suba sobre el escalón.

3. Desbloqueo de los frenos

Algunas situaciones pueden requerir el control del dispositivo sin encenderlo ni utilizar el joystick, esto se conoce como modo de rueda libre. Esto se puede realizar utilizando las dos palancas rojas de liberación del freno.

Apague el dispositivo. Empuje hacia abajo las dos palancas de liberación del freno situadas debajo del asiento.




Levante ambas palancas de liberación del freno para volver a accionar los frenos.



No suelte los frenos en una pendiente. Asegúrese de soltar los frenos solo cuando esté en una superficie plana y, en caso de emergencia, después de apagar el dispositivo. Después de mover el dispositivo manualmente con los frenos desactivados, asegúrese de levantar las dos palancas de liberación del freno para volver a activar los frenos.

4. Uso de la llave inteligente

La llave inteligente se puede utilizar para bloquear y desbloquear el dispositivo.

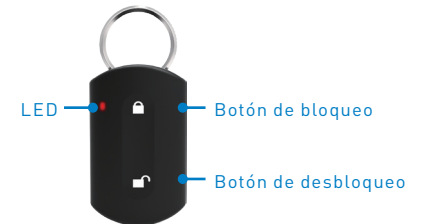

Presione el botón de bloqueo de la llave inteligente.

El icono que indica el estado de bloqueo se mostrará en la pantalla del controlador y emitirá un sonido de bloqueo. Al intentar encender el dispositivo cuando está bloqueado, el icono que indica el estado de bloqueo se mostrará en la pantalla. El dispositivo no se puede encender.

Presione el botón de desbloqueo de la llave inteligente.

El led de la llave inteligente se iluminará y el icono que indica el estado de desbloqueo se mostrará en la pantalla y emitirá un sonido de desbloqueo. El dispositivo estará desbloqueado.

Se vende por separado. Equipado con artículos estándar según las zonas/países.

5. Procedimiento de desmontaje



Al montar o desmontar el dispositivo, agarre solamente las manijas y las piezas, tal como se describe en las instrucciones, y no sujete el dispositivo por ninguna otra parte.

Este dispositivo puede desmontarse en los siguientes cinco componentes.


※ Quite la batería antes del desmontaje.



1 Extracción de la batería



Presione el botón de liberación del bloqueo de la batería. Agarre la manija y tire de ella para extraer la batería.

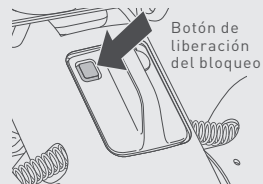

2 Extracción del conjunto del asiento.



Tire hacia arriba y hacia usted de la palanca de liberación del asiento.

Agarre los apoyabrazos y levante el conjunto del asiento.

※ Levante lentamente el conjunto del asiento para que no dañe otras partes.

※ Cuando coloque el conjunto del asiento en el suelo, colóquelo con el cojín hacia arriba.



Al levantar el conjunto del asiento, el magnetismo de los conectores magnéticos situados en la conexión entre el conjunto del asiento y la base de tracción trasera puede tener un efecto adverso en los dispositivos médicos eléctricos. Las personas que tengan un marcapasos o un desfibrilador implantado u otros dispositivos médicos eléctricos en sus cuerpos deben dejar un mínimo de 8 pulgadas (20 cm) entre ellos y los conectores magnéticos.

3 Extracción de la cesta portaobjetos

Quite los objetos de la cesta portaobjetos, luego levante la cesta portaobjetos sosteniendo las manijas de la cesta y quítela de la base de tracción delantera.

4 Desconexión de la base de tracción delantera



Levante la manija de liberación de la base.


Agarre la manija cerca del centro de la base de tracción delantera y desconecte la Barra B en un extremo de la base de tracción delantera del gancho de la base de tracción trasera.



* Al realizar el desmontaje, sostenga la base de tracción trasera con la mano, para evitar que se caiga.

6. Procedimiento de montaje

1 Montaje de la base de tracción delantera y de la base de tracción trasera

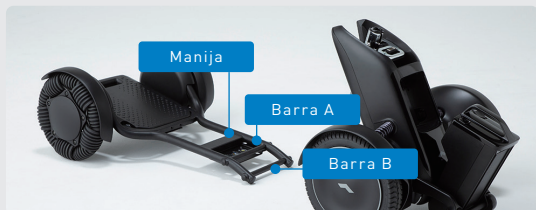

Agarre la manija cerca del centro de la base de tracción delantera mientras inclina la base de tracción delantera del gancho de la base de tracción trasera. Luego, alinee la Barra B con el gancho de la base de tracción trasera.




Incline lentamente la base de tracción trasera hacia adelante y conéctela a la base de tracción delantera. La manija de liberación de la base de tracción trasera se engancha a la Barra A de la base de tracción delantera. Se oír un clic cuando las dos partes estén correctamente conectadas.

2 Instalación de la cesta portaobjetos



Alinee los ganchos del fondo de la cesta portaobjetos con el bastidor de la base de tracción delantera, y luego empuje la cesta portaobjetos hacia abajo. Empuje la parte plana del fondo de la cesta hasta que haga clic.

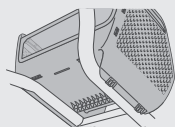


! Si el dispositivo no se enciende correctamente aunque la batería cargada esté insertada en el dispositivo y este último esté encendido, extraiga la batería y vuelva a colocarla después de 10 segundos.

3 Instalación del conjunto del asiento



Quite el cojín del asiento, agarre los apoyabrazos y levante el conjunto del asiento.

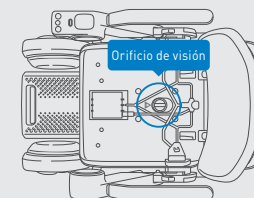

Use el orificio de visión para alinear y colocar el conjunto del asiento en la tija del asiento.



Empuje hacia abajo la palanca de liberación del asiento hasta la posición vertical y fije el respaldo del cojín a la base del asiento.

4 Instalación de la batería



Asegúrese de que el botón de liberación del bloqueo de la batería no esté presionado. Agarre la manija de la batería e inserte la batería en el compartimento de la misma. Si resulta difícil, empuje la batería con más fuerza.

7. Carga de la batería

1 Carga con la batería instalada en el dispositivo


Acerque el dispositivo a la toma de corriente y apague la alimentación del dispositivo.
Conecte el cargador y el cable del conector de CA.

Enchufe el cargador en la toma de corriente. El indicador del cargador se ilumina de color rojo.

Quite la tapa del puerto de carga de la batería y conecte el conector de CC al puerto de carga de la batería. El indicador del cargador empieza a parpadear de color verde y la carga comienza.

La carga se completa cuando el indicador del cargador se pone de color verde constante.

Desconecte el conector de CC de la batería y luego desconecte el enchufe de la toma de corriente. Cierre la tapa del puerto de carga de la batería.

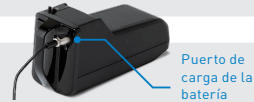

2 Carga con la batería extraída

Compruebe que el dispositivo esté apagado y presione el botón de liberación del bloqueo de la batería. Agarre la manija y tire de ella para extraer la batería.

Conecte el cargador y el cable del conector de CA. Enchufe el cargador en la toma de corriente.

Quite la tapa del puerto de carga de la batería y conecte el conector de CC al puerto de carga de la batería.
El indicador del cargador empieza a parpadear de color verde y la carga comienza.

La carga se completa cuando el indicador del cargador y led de la batería se ponen de color verde constante.

Desconecte el conector de CC de la batería y luego el enchufe de la toma de corriente.



- Para evitar quemaduras, no toque la batería ni el cargador durante la carga.
- Asegúrese de realizar la carga de la batería en ambientes interiores.
- La batería y el cargador son exclusivamente para el WHILL Modelo C2.
- Use solamente la batería y el cargador designados para este dispositivo.

8. Resolución de problemas

En caso de que se presenten alguno problemas con el dispositivo, un código de error aparecerá en la pantalla. Si se muestra un error que no aparece en la lista o el problema persiste a pesar de que se ha tratado un problema de acuerdo con la resolución de problemas, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente.

Comportamiento del dispositivo	Código de error	Causa	Resolución
Aparece el icono que se muestra a la derecha.		Intento de accionamiento del panel de control al girar el brazo hacia arriba.	Baje el brazo y encienda de nuevo el dispositivo.
		El joystick no estaba en posición neutra al encender el dispositivo.	Vuelva a encenderlo sin tocar el joystick.
		Las palancas de freno están desactivadas.	Bloquee los frenos y vuelva a encender el dispositivo.
		El cargador estaba conectado durante el encendido o el dispositivo estaba encendido al conectarlo al cargador.	Desconecte el cargador de la batería.
		El nivel de carga de la batería es bajo.	Recargue la batería.
La velocidad máxima disminuye.		La temperatura de la batería bajó significativamente.	Guarde la batería a temperatura ambiente o al menos a una temperatura ambiente superior a 0 °C (32 °F) hasta que la temperatura de la batería supere los 0 °C (32 °F).
La velocidad máxima se recupera.		La temperatura de la batería subió por encima de 0 °C (32 °F).	
Aparece el icono que se muestra a la derecha.		El nivel de la batería de la llave inteligente es bajo.	Sustituya la batería de la llave inteligente.
Aparece el icono que se muestra a la derecha.		El dispositivo podría estar en una pendiente ascendente.	El dispositivo podría estar en una pendiente insegura para el funcionamiento. Desplácese lentamente hacia un lugar donde la pendiente sea menos empinada y compruebe su seguridad. Una vez que se emite el sonido de advertencia, el mismo no se volverá a emitir durante unos 2 minutos.



- Si el dispositivo no se enciende, compruebe el nivel de la batería y si está completamente introducida en el compartimento. Si el dispositivo no se enciende correctamente, extraiga la batería y vuelva a colocarla después de 10 segundos y encienda el dispositivo 5 segundos después.