

Comment coupler votre application pour smartphone

L'application permet aux utilisateurs de vérifier le kilométrage total, la distance parcourue, le niveau de la batterie, les cycles de charge complète et d'utiliser la fonction de télécommande. Les utilisateurs peuvent également verrouiller et déverrouiller le dispositif.

1. Vous devez installer l'application au préalable. Pour l'installer, rendez-vous sur l'App Store et recherchez « WHILL ». Cliquez sur l'icône bleue du logo WHILL pour l'application de la série WHILL Model C2/F. (L'icône grise du logo correspond à WHILL Model C)



2. Pour coupler votre appareil, lancez l'application WHILL Model C2/F et saisissez les codes suivants* à l'écran ou scannez le code QR.*

- 🔑 Code alphanumérique à 11 caractères
- 🔑 Mot de passe

*L'identifiant et le mot de passe uniques de l'application ainsi que le code QR sont imprimés sur une feuille de papier et placés dans la boîte contenant les accoudoirs. Remarque : Selon la région et le type de smartphone, il se peut que l'application ou certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté traitera les demandes de réparation, de maintenance et de remplacement des pièces.

Revendeur

Fabricant WHILL, Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japon

Guide de fonctionnement

WHILL modèle F



Le présent Guide de fonctionnement est destiné à fournir des instructions sur l'utilisation de base de l'appareil. Pour une utilisation sûre de l'appareil, veuillez à lire attentivement ce guide avant l'emploi. Il est recommandé de garder ce guide à portée de main à tout moment à titre de référence.

1. Principales précautions d'utilisation

Le WHILL modèle F est un véhicule de mobilité. Les personnes qui éprouvent des difficultés à utiliser un fauteuil roulant électrique doivent s'abstenir d'utiliser le dispositif.

- Le poids maximum que peut supporter cet appareil est d'environ 253,5 lb (115 kg). Ce poids inclut l'occupant et les bagages éventuels. Veillez à ne pas dépasser le poids maximum que peut supporter cet appareil pendant l'utilisation.
- Coupez l'alimentation de l'appareil pour y monter ou en descendre.
- Gardez les pieds sur le repose-pieds pendant la conduite pour éviter que vos pieds ou vos vêtements ne se coincent dans des composants mobiles.
- Évitez la circulation et les espaces étroits, et respectez le code de la route pour conduire en toute sécurité.

Habilitez-vous de manière appropriée pour conduire.


- Il existe un risque que les vêtements tels que les longues écharpes, les pantalons amples, les jupes et les manteaux de pluie se prennent dans les pneus ou d'autres pièces de l'appareil, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Si vous portez des gants, veillez à ce qu'ils ne se coincent pas dans l'appareil, par exemple dans les composants de commande.

Conduisez prudemment dans les zones suivantes.



Lorsque vous traversez des passages à niveau ou des voies de tram, approchez-vous et traversez perpendiculairement aux voies.

Veillez à ce que l'appareil ne se coince pas dans la rainure des rails.

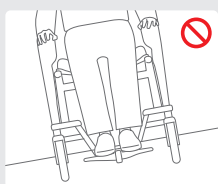


Ne conduisez pas à des endroits où l'appareil risque de s'incliner de manière significative.

Évitez les passages à niveau et empruntez un itinéraire plus sûr autant que possible. Si vous devez franchir un passage à niveau, assurez-vous de comprendre comment desserrer manuellement les freins (p4) et demandez à un soignant de vous accompagner. Ne conduisez pas l'appareil dans des zones à surface molle comme le sable, la boue, les chemins enneigés ou gelés. Il y a un risque que des accidents se produisent.

● Présente un danger dans l'environnement de la résonance magnétique (RM) Le WHILL modèle F est incompatible avec la RM. Il existe un risque que le dispositif devienne un projectile.



2. Opérations de base

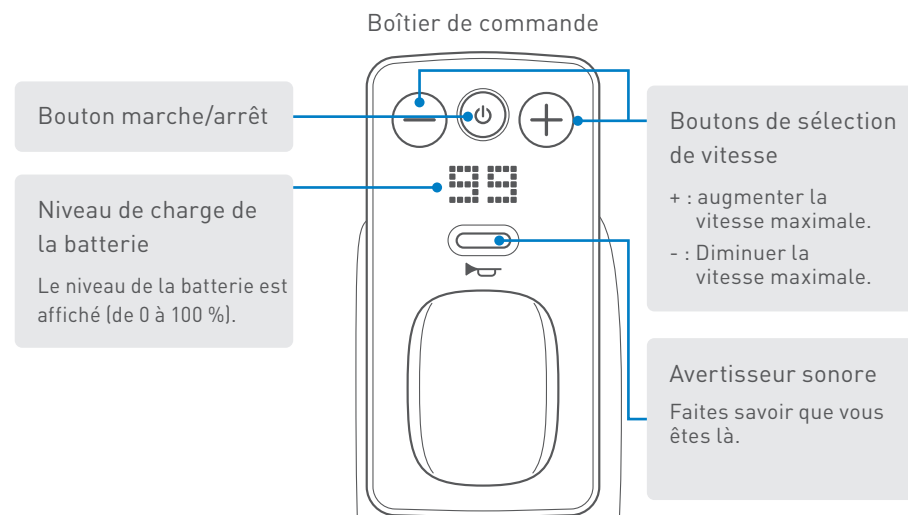

- 1 Monter dans l'appareil** Vérifiez que l'appareil est éteint avant de monter dedans.
- 2 Allumer l'appareil** Appuyez sur le bouton marche/arrêt et vérifiez que l'écran s'allume.
- 3 Régler la vitesse** Réglez la vitesse de 1 à 4 à l'aide des boutons de sélection de vitesse.
- 4 Se déplacer et tourner** Déplacez lentement le joystick dans la direction souhaitée.
- 5 Arrêter** Relâchez le joystick.
- 6 Éteindre l'appareil** Appuyez sur le bouton marche/arrêt et vérifiez que l'écran s'éteint.
- 7 Descendre de l'appareil** Vérifiez que l'écran est éteint, puis descendez de l'appareil.



Veillez à couper l'alimentation de l'appareil pour y monter ou en descendre.

2. Conseils pour la conduite Opérations de base

1. Comment s'arrêter

Relâchez le joystick pour arrêter l'appareil. Lorsque vous relâchez le joystick, les freins s'enclenchent automatiquement et l'appareil s'arrête, même en montée ou en descente.

2. Comment tenir le joystick

Placez les doigts sur le joystick.



3. Comment déplacer le joystick

Réglage de la vitesse

La vitesse de l'appareil peut être contrôlée en fonction du degré d'inclinaison du joystick. Au début, assurez-vous d'actionner le joystick doucement et de conduire lentement.




Inclinaison légère = lent



Plus d'inclinaison = rapide

Franchir une marche

Lorsque vous franchissez une marche, approchez-la en formant un angle droit avec celle-ci.

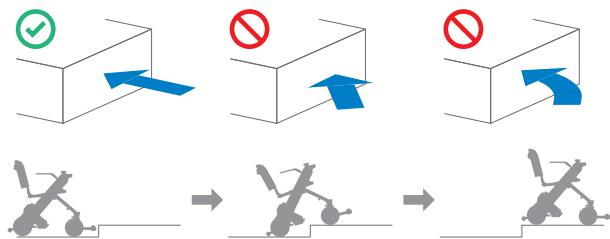

Arrêtez-vous lorsque les roues avant butent contre la marche.

Ralentissez une fois que les roues avant ont franchi la marche.

Faites de même pour les roues arrière afin que l'appareil passe au-dessus de la marche.

Arrêtez-vous juste avant la marche et ralentissez une fois que les roues avant l'ont franchie.

3. Débrayage des freins

Dans certaines situations, il peut être nécessaire de contrôler l'appareil sans l'allumer et sans utiliser le joystick (mode roue libre). Pour cela, utilisez les deux leviers de débrayage rouges.

Mettez le dispositif hors tension. Abaissez les deux leviers de débrayage situés sous le siège.



Pour réenclencher les freins, relevez les deux leviers de débrayage.



Ne pas relâcher les freins sur une pente. Veillez à relâcher les freins uniquement lorsque vous êtes sur une surface plane et en cas d'urgence après avoir coupé le courant. Après avoir déplacé l'appareil manuellement avec les freins relâchés, veillez à soulever les deux leviers de débrayage afin de réenclencher les freins.

4. Procédure de repliage

Le modèle F est repliable.



- Effectuez le pliage de l'appareil sur une surface plane et horizontale. Sinon, il y a un risque d'accident.
- Effectuez le pliage de l'appareil avec les freins serrés. Dans le cas contraire, il y a un risque de mouvement involontaire du dispositif qui peut provoquer des accidents.
- Lorsque vous tenez l'appareil, saisissez uniquement la poignée et la partie comme indiqué sur la photo. Sinon, vous risquez de vous blesser la main si elle se coince dans le dispositif.



1 Inclinez le dossier vers l'avant du siège.



2 Fixez le dispositif en place tout en soutenant la pédale.



Une pédale d'appui reliant les deux rouleaux anti-basculement empêche le dispositif de bouger lorsqu'il est plié.



Vous risqueriez de vous blesser si votre pied se coince sous la pédale lors du repliage du dispositif.

3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage



Le bouton de déverrouillage est situé à l'avant du bras droit. Maintenez le dispositif dans cet état avec le bouton de déverrouillage enfoncé.

4 Tirez le tube du cadre du siège vers le haut.



Saisissez le tube du cadre du siège à l'arrière du siège et tirez-le vers le haut tout en continuant à appuyer sur le bouton de déverrouillage.



Lorsque le dispositif commence à se fermer, éloignez votre main du bouton de déverrouillage.

5 Fermez le dispositif.



Fermez le dispositif jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Enfin, poussez doucement sur le tube du cadre du siège une fois de plus pour vous assurer que le dispositif est bien verrouillé et ne s'ouvrira pas.



Assurez-vous que l'appareil est correctement verrouillé après le pliage pour éviter tout risque d'ouverture inopinée du dispositif.

5. Dépliage du dispositif



- Procédez au dépliage du dispositif sur une surface plane et horizontale.
- Procédez au dépliage du dispositif avec les freins serrés.
- Lorsque vous dépliez l'appareil, saisissez uniquement la poignée et la partie comme indiqué sur la photo.

1 Fixez le dispositif en place tout en soutenant la pédale.



Une pédale d'appui reliant les deux rouleaux anti-basculement empêche le dispositif de bouger lors du dépliage.

2 Tirez le tube du cadre du siège vers le haut et appuyez sur le bouton de déverrouillage.



Saisissez le tuyau du cadre du siège à l'arrière du siège et tirez-le vers le haut pour maintenir le dispositif en l'état.



Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'avant du bras droit.

Le bouton de déverrouillage est conçu de manière à ne pouvoir être enfoncé que lorsque le tube du cadre du siège est tiré vers le haut.

3 Abaissez le tube du cadre du siège.




Abaissez le tube du cadre du siège tout en continuant à appuyer sur le bouton de déverrouillage pour déplier le dispositif. Lorsque l'appareil commence à se déplier, éloignez vos mains du bouton.

4 Dépliez le dispositif.



Ouvrez le dispositif jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

5 Inclinez le dossier arrière vers l'arrière et vérifiez l'indicateur de verrouillage.

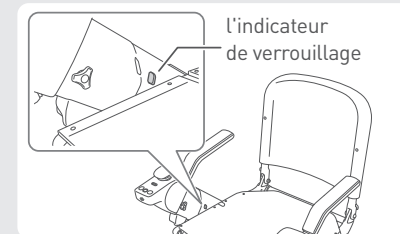

Vérifiez que l'indicateur de verrouillage situé à l'intérieur du bras droit est noir.



Assurez-vous que l'indicateur de verrouillage est noir après avoir déplié l'appareil afin d'éviter que l'appareil ne se replie involontairement pendant la conduite, ce qui pourrait provoquer un accident.

6. Charge de la batterie

1 Recharge avec la batterie installée sur l'appareil

Placez l'appareil près de la prise et coupez son alimentation.
Branchez le chargeur et le cordon d'alimentation secteur.

Branchez le chargeur sur la prise de courant. L'indicateur de charge s'allume en rouge.

Retirez le capuchon du port de charge de la batterie et branchez le connecteur CC sur le port de charge de la batterie. L'indicateur de charge se met à clignoter en vert, et la recharge commence.

La recharge est terminée lorsque l'indicateur de charge devient vert fixe.

Débranchez le connecteur CC de la batterie, puis débranchez la fiche de la prise de courant. Fermez le capuchon du port de charge de la batterie.

2 Recharge avec la batterie retirée de l'appareil

Vérifiez que l'appareil est éteint et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie. Saisissez la poignée et tirez-la pour retirer la batterie.

Branchez le chargeur et le cordon d'alimentation secteur. Branchez le chargeur sur la prise de courant.

Retirez le capuchon du port de charge de la batterie et branchez le connecteur CC sur celui-ci. L'indicateur de charge se met à clignoter en vert, et la charge commence.

La recharge est terminée lorsque l'indicateur de charge et la batterie LED deviennent vert fixe.

Débranchez le connecteur CC de la batterie, puis la fiche de la prise de courant.



- Ne touchez pas la batterie et le chargeur pendant la charge pour éviter des brûlures.
- Assurez-vous de recharger la batterie à l'intérieur.
- N'utilisez que la batterie et le chargeur prévus pour l'appareil.

7. Dépannage

Dans le cas de certains problèmes avec le dispositif, un code d'erreur s'affiche à l'écran. Si une erreur non répertoriée s'affiche ou si le problème persiste alors qu'il a été traité conformément à la procédure de dépannage, contactez votre revendeur ou le service clientèle.

Comportement de l'appareil	Code d'erreur	Cause	Solution
L'icône de droite apparaît.		La télécommande est utilisée alors que le dispositif est replié.	Déverrouillez le dispositif et remettez-le sous tension.
		Le joystick n'était pas au point mort lors de la mise sous tension.	Remettez le dispositif sous tension sans toucher le joystick.
		Les leviers de frein sont désenclenchés.	Verrouillez les freins et remettez l'appareil sous tension.
		Le chargeur était branché alors que l'appareil était sous tension, ou l'appareil a été allumé alors qu'il était connecté au chargeur.	Débranchez le chargeur de la batterie.
		Le niveau de charge de la batterie est faible.	Rechargez la batterie.
La vitesse maximale diminue.		La température de la batterie a chuté considérablement.	Stockez la batterie à température ambiante ou à une température ambiante au moins supérieure à 0 °C (32 °F) jusqu'à ce que la température de la batterie remonte au-dessus de 0 °C (32 °F).
La vitesse maximale se rétablit.		La température de la batterie a dépassé 0 °C (32 °F).	
L'icône de droite apparaît.		La pile de la clé électronique est plate.	Remplacez la pile de la clé électronique.
L'appareil ne s'allume pas. L'écran LED ne s'allume pas.	N/A	Le niveau de charge de la batterie est faible.	Chargez la batterie.
		La batterie n'est pas complètement insérée dans son compartiment situé sur la base de propulsion arrière.	Insérez la batterie à fond. Retirez la batterie, puis remettez-la en place après 10 secondes.
		Le connecteur du câble à l'arrière du siège est débranché.	Raccordez le connecteur du câble.