

REF

32-10037-13-06 GR



Τρόπος ζεύξης της εφαρμογής smartphone σας

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τη συνολική χιλιομετρική απόσταση, τη διανυθείσα απόσταση, το επίπεδο μπαταρίας, τους κύκλους πλήρους φόρτισης και τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν τη μονάδα.

1. Πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα την εφαρμογή. Για να την εγκαταστήσετε, πηγαίnete στο App Store και αναζητήστε την εφαρμογή "WHILL". Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μπλε λογότυπο WHILL για την εφαρμογή WHILL Model C2.

(Το εικονίδιο με το γκρι λογότυπο είναι για την εφαρμογή WHILL Model C.)

2. Για να συνδέσετε τη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή WHILL Model C2 και πληκτρολογήστε τους παρακάτω κωδικούς* στην οθόνη.

- 11ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός
- κωδικός πρόσβασης

*Οι δύο κωδικοί είναι τυπωμένοι στο χαρτί που είναι τοποθετημένο στην εσοχή του καθίσματος της συσκευής.

Σημείωση: Ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο του smartphone, η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ή να μην προσφέρει κάποιες λειτουργίες.

Ο διανομέας από τον οποίο αγοράστηκε η συσκευή θα διεκπεραιώνει αιτήματα επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης εξαρτημάτων.

Διανομέας

Κατασκευαστής WHILL Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan

www.whill.inc

Οδηγός χειρισμού

WHILL Model C2



Ο παρών Οδηγός Χειρισμού παρέχει οδηγίες για τη βασική χρήση της συσκευής. Για να χειριστείτε τη συσκευή με ασφάλεια, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση. Σας συνιστούμε να έχετε τον οδηγό διαθέσιμο συνεχώς για να

1. Βασικές προφυλάξεις χρήσης


Το WHILL Model C2/CK2 είναι ένα όχημα κινητικότητας. Τα άτομα που δυσκολεύονται στη χρήση ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδιού δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

- Το μέγιστο βάρος φορτίου αυτής της συσκευής είναι περίπου 136 kg (300 lbs). Στο βάρος αυτό περιλαμβάνεται τόσο το άτομο που κάθεται στη συσκευή όσο και τυχόν αποσκευές. Βεβαιωθείτε ότι το βάρος φορτίου δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο κατά την χρήση.
- Απενεργοποιείτε την ισχύ της συσκευής όταν ανεβαίνετε στη συσκευή και κατεβαίνετε από αυτή.
- Κατά την οδήγηση, διατηρείτε τα πόδια σας επάνω στο υποπόδιο για να μην πιαστούν τα πόδια ή τα ρούχα σας σε κινούμενα εξαρτήματα.
- Αποφύγετε την πολλή κίνηση και τα στενά μέρη, και ακολουθήστε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας για να οδηγείτε με ασφάλεια.

Φοράτε κατάλληλα ρούχα για οδήγηση.


- Υπάρχει κίνδυνος ορισμένα ρούχα, όπως μακριά κασκόλ, φαρδιά παντελόνια, φούστες και αδιάβροχα, να πιαστούν στα ελαστικά ή σε άλλα μέρη της συσκευής και να προκληθεί τραυματισμός.
- Όταν φοράτε γάντια, πρέπει να προσέχετε να μην πιαστούν στη συσκευή, όπως στα εξαρτήματα ελέγχου.

Οδηγείτε προσεκτικά στα παρακάτω μέρη.

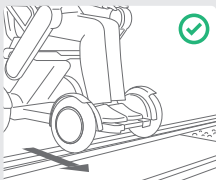

Όταν διασχίζετε σιδηροδρομικές διαβάσεις ή γραμμές του τραμ, προσεγγίστε τις γραμμές και διασχίστε τις κάθετα.

Φροντίστε να μην κολλήσει η συσκευή στην αυλάκωση των γραμμών.

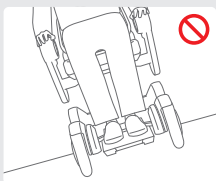


Μην οδηγείτε σε μέρη όπου η συσκευή μπορεί να γέρνει σημαντικά.

Αποφύγετε τις σιδηροδρομικές διαβάσεις και επιλέξτε μια ασφαλέστερη διαδρομή, όπου είναι δυνατό.

Εάν πρέπει να διασχίσετε μια σιδηροδρομική διάβαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πώς να απελευθερώσετε τα φρένα με μη αυτόματο τρόπο (σ.4) και ζητήστε από κάποιον φροντιστή να σας συνοδεύσει.

Μην οδηγείτε τη συσκευή σε μέρη με μαλακές επιφάνειες, όπως άμμο, λάσπη, χιόνι ή παγωμένα μονοπάτια. Υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.

2. Βασικές λειτουργίες

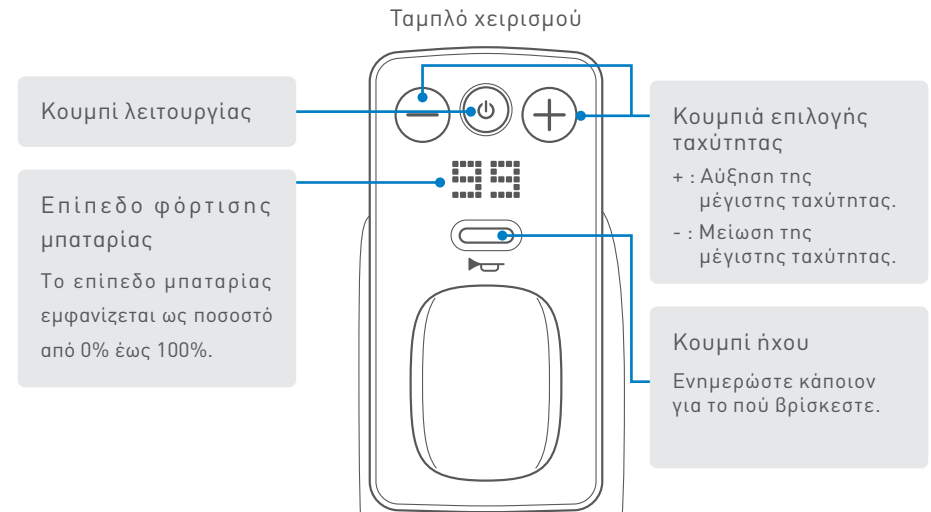

- 1. Επιβίβαση στη συσκευή** Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της συσκευής είναι απενεργοποιημένη πριν να ανεβείτε στη συσκευή.
- 2. Ενεργοποίηση ισχύος** Πατήστε το κουμπι λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι η οθόνη ενεργοποιείται.
- 3. Ρύθμιση ταχύτητας** Επιλέξτε τη ρύθμιση της ταχύτητας από το 1 έως το 4 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής ταχύτητας.
- 4. Μετακίνηση και αναστροφή** Μετακινείτε το joystick αργά προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- 5. Ακινητοποίηση** Απελευθερώστε το joystick.
- 6. Απενεργοποίηση ισχύος** Πατήστε το κουμπι λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι η οθόνη απενεργοποιείται.
- 7. Αποβίβαση από τη συσκευή** Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και κατεβείτε από τη συσκευή.



Φροντίστε να έχετε απενεργοποιήσει την ισχύ της συσκευής όταν ανεβαίνετε στη συσκευή και κατεβαίνετε από αυτή.

2. Συμβουλές οδήγησης > Βασικές λειτουργίες

1 Τρόπος ακινητοποίησης

Απελευθερώστε το joystick για να σταματήσετε. Η απελευθέρωση του joystick συνεπάγεται αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων και ακινητοποίηση της συσκευής ακόμα και σε σημείο με ανηφορική ή κατηφορική κλίση.

2 Τρόπος συγκράτησης του joystick

Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στο joystick.



3 Τρόπος μετακίνησης του joystick

Ρύθμιση της ταχύτητας
Η ταχύτητα της συσκευής εξαρτάται από τον βαθμό κλίσης της κίνησης του joystick.

Αρχικά, φροντίστε να χειρίζεστε το joystick απαλά και να οδηγείτε αργά.




Μικρή κλίση = αργά

Μεγαλύτερη κλίση = γρήγορα

Ανάβαση σκαλοπατιού

Για να ανεβείτε ένα σκαλοπάτι, προσεγγίστε το σκαλοπάτι υπό κατάλληλη γωνία.

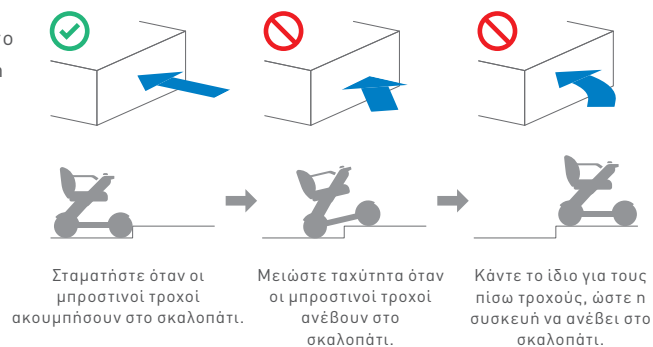

3. Απελευθέρωση των φρένων

Σε ορισμένες καταστάσεις μπορεί να απαιτείται έλεγχος της συσκευής χωρίς ενεργοποίησή της και χρήση του joystick —λειτουργία γνωστή ως λειτουργία ελεύθερων τροχών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των δύο κόκκινων μοχλών απελευθέρωσης φρένου.

Απενεργοποιήστε την ισχύ της συσκευής. Χαμηλώστε και τους δύο μοχλούς απελευθέρωσης φρένου κάτω από το κάθισμα.

Ανυψώστε και τους δύο μοχλούς απελευθέρωσης φρένου για να ενεργοποιήσετε ξανά τα φρένα στη συνέχεια.



Μην απελευθερώσετε τα φρένα σε κεκλιμένο έδαφος. Φροντίστε να απελευθερώνετε τα φρένα μόνο σε επίπεδες επιφάνειες και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αφού έχετε απενεργοποιήσει την ισχύ. Μετά τη μη αυτόματη μετακίνηση της συσκευής με απελευθερωμένα τα φρένα, φροντίστε να ανυψώσετε τους δύο μοχλούς απελευθέρωσης φρένου για να ενεργοποιήσετε ξανά τα φρένα.

4. Χρήση του έξυπνου κλειδιού

Το έξυπνο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της συσκευής.

Λυχνία LED

Κουμπί κλειδώματος

Κουμπί ξεκλειδώματος

Κλειδωμένο



Ξεκλειδωμένο



Πατήστε το κουμπί κλειδώματος του έξυπνου κλειδιού. Το εικονίδιο που υποδηλώνει την κατάσταση κλειδώματος θα εμφανιστεί στην οθόνη του χειριστηρίου και θα ακουστεί ήχος κλειδώματος. Όταν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν είναι κλειδωμένη, το εικονίδιο που υποδηλώνει την κατάσταση κλειδώματος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής.

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος του έξυπνου κλειδιού. Η ενδεικτική λυχνία LED του έξυπνου κλειδιού θα ανάψει και το εικονίδιο που υποδηλώνει την κατάσταση κλειδώματος θα εμφανιστεί στην οθόνη του χειριστηρίου και θα ακουστεί ήχος κλειδώματος. Η συσκευή θα ξεκλειδωθεί.

Πωλείται ξεχωριστά. Στον βασικό εξοπλισμό ανάλογα με τις περιοχές/χώρες.

5. Διαδικασία αποσυναρμολόγησης

! Κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, πρέπει να κρατάτε μόνο τις λαβές και τα εξαρτήματα όπως περιγράφεται στις οδηγίες και δεν πρέπει να πιάνετε τη συσκευή από άλλα σημεία.


Αυτή η συσκευή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί στα παρακάτω πέντε εξαρτήματα.
※ Αφαιρέστε τη μπαταρία πριν από την αποσυναρμολόγηση.



1 Αφαίρεση της μπαταρίας



Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος της μπαταρίας. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε την για να αφαιρέσετε τη μπαταρία.

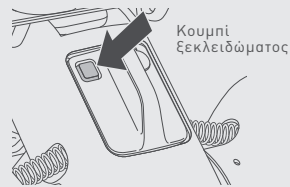

2 Αφαίρεση της διάταξης καθίσματος



Τραβήξτε προς τα επάνω τον μοχλό απελευθέρωσης καθίσματος προς το μέρος σας.

Ανασηκώστε αργά τη διάταξη καθίσματος έτσι ώστε να μην προκληθούν φθορές στα άλλα μέρη.

※ Όταν η διάταξη καθίσματος τοποθετείται στο πάτωμα, πρέπει να τοποθετείται με το μαξιλάρι προς τα επάνω.

! Κατά την ανύψωση της διάταξης καθίσματος, ο μαγνητισμός που εκπέμπεται από τις μαγνητικές επαφές που βρίσκονται στη σύνδεση μεταξύ της διάταξης καθίσματος και της πίσω βάσης κίνησης μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε ηλεκτρικές ιατροτεχνολογικές συσκευές. Τα άτομα που έχουν εμφυτευμένο βηματοδότη, εμφυτευμένο απινιδωτή ή άλλες ηλεκτρικές ιατροτεχνολογικές συσκευές στο σώμα τους, πρέπει να

3 Αφαίρεση του καλαθιού αποθήκευσης

Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα από το καλάθι αποθήκευσης, ανασηκώστε το καλάθι αποθήκευσης ευθεία προς τα επάνω κρατώντας τις λαβές του και αφαιρέστε το από τη μπροστινή βάση κίνησης.

4 Αποσύνδεση της μπροστινής βάσης κίνησης



Ανεβάστε τον μοχλό απελευθέρωσης βάσης.

Πιάστε τη λαβή κοντά στο κέντρο της μπροστινής βάσης κίνησης και αποσυνδέστε τη μπάρα Β στο ένα άκρο της μπροστινής βάσης κίνησης από τον γάντζο της πίσω βάσης κίνησης.



* Κατά την αποσυναρμολόγηση, στηρίξτε την πίσω βάση κίνησης με το χέρι σας για να μην πέσει κάτω.

6. Διαδικασία συναρμολόγησης

1 Συναρμολόγηση της μπροστινής βάσης κίνησης και της πίσω βάσης κίνησης



Πιάστε τη λαβή κοντά στο κέντρο της μπροστινής βάσης κίνησης ενώ γέρνετε υπό κλίση προς τα επάνω την πίσω βάση κίνησης. Έπειτα, ευθυγραμμίστε τη μπάρα Β με τον γάντζο στην πίσω βάση κίνησης.




Γείρετε αργά την πίσω βάση κίνησης προς τα εμπρός και συνδέστε τη με τη μπροστινή βάση κίνησης. Ο μοχλός απελευθέρωσης της πίσω βάσης κίνησης ασφαλίζει τη μπάρα Α της μπροστινής βάσης κίνησης. Ακούγεται ένα κλικ όταν τα δύο εξαρτήματα συνδεθούν κατάλληλα.

2 Εγκατάσταση του καλαθιού αποθήκευσης



Ευθυγραμμίστε τους γάντζους στο κάτω μέρος του καλαθιού αποθήκευσης με το πλαίσιο της μπροστινής βάσης κίνησης και, στη συνέχεια, ωθήστε το καλάθι αποθήκευσης ευθεία προς τα κάτω. Ωθήστε το επίπεδο μέρος στον πάτο του καλαθιού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

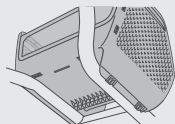


! Εάν η συσκευή δεν ξεκινά να λειτουργεί κανονικά ακόμα και αν μια φορτισμένη μπαταρία είναι τοποθετημένη στη συσκευή και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αφαιρέστε τη μπαταρία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.


3 Τοποθέτηση της διάταξης καθίσματος



Αφαιρέστε το μαξιλάρι καθίσματος, πιάστε τα μπράτσα και ανασπώστε τη διάταξη καθίσματος.

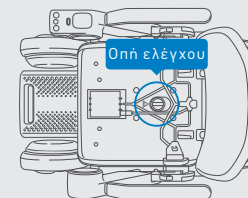

Χρησιμοποιήστε την οπή ελέγχου για να ευθυγραμμίσετε και να τοποθετήσετε τη διάταξη καθίσματος στον στύλο καθίσματος.

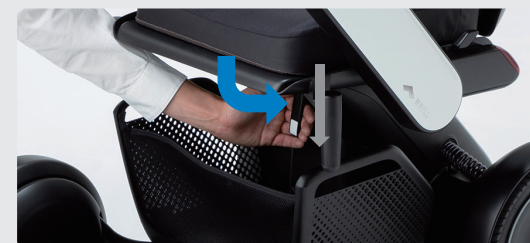

Ωθήστε τον μοχλό απελευθέρωσης καθίσματος προς τα κάτω σε κατακόρυφη θέση και τοποθετήστε το μαξιλάρι ξανά στη βάση του καθίσματος.

4 Τοποθέτηση της μπαταρίας



Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος μπαταρίας δεν είναι πατημένο. Πιάστε τη λαβή της μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία μέσα στη θυρίδα της μπαταρίας. Αν δυσκολεύεστε, πιέστε τη μπαταρία πιο δυνατά.

7. Φόρτιση της μπαταρίας

1 Φόρτιση με τη μπαταρία τοποθετημένη στη συσκευή


Μετακινήστε τη συσκευή κοντά στην πρίζα και απενεργοποιήστε την ισχύ της συσκευής. Συνδέστε τον φορτιστή και το καλώδιο μετασχηματιστή AC.

Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Η λυχνία του φορτιστή ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης της μπαταρίας και συνδέστε το βύσμα DC στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας. Η λυχνία του φορτιστή αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και η φόρτιση ξεκινά.

Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η λυχνία του φορτιστή ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Αποσυνδέστε το βύσμα DC από τη μπαταρία και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα. Κλείστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης της μπαταρίας.

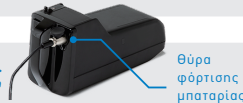

2 Φόρτιση κατόπιν αφαίρεσης της μπαταρίας

Ελέγξτε ότι η ισχύς της συσκευής είναι απενεργοποιημένη και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος μπαταρίας. Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε την για να αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Συνδέστε τον φορτιστή και το καλώδιο μετασχηματιστή AC. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης μπαταρίας και συνδέστε το βύσμα DC σε αυτήν. Η λυχνία του φορτιστή αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και η φόρτιση ξεκινά.

Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η λυχνία του φορτιστή και η ενδεικτική λυχνία LED της μπαταρίας ανάψουν σταθερά με πράσινο χρώμα.

Αποσυνδέστε το βύσμα DC του φορτιστή από τη μπαταρία και, έπειτα, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.



- Μην αγγίζετε τη μπαταρία και τον φορτιστή κατά τη φόρτιση για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Φροντίστε να φορτίζετε τη μπαταρία σε εσωτερικό χώρο.
- Η μπαταρία και ο φορτιστής προορίζονται μόνο για το WHILL Model C2.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία και τον καθορισμένο φορτιστή για τη συσκευή.

8. Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση ορισμένων προβλημάτων με τη συσκευή, θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη. Εάν εμφανίζεται ένα μη καταγεγραμμένο σφάλμα ή εάν το σφάλμα παραμένει παρά το ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον διανομέα ή με την υποστήριξη πελατών.

Συμπεριφορά της συσκευής	Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύση
Εμφανίζεται το εικονίδιο που φαίνεται στα δεξιά.		Επιχειρήθηκε χρήση του ταμπλό χειρισμού με ανυψωμένο τον βραχίονα.	Κατεβάστε τον βραχίονα και ενεργοποιήστε ξανά την
		Το joystick δεν ήταν στην ουδέτερη θέση κατά την ενεργοποίηση της ισχύος.	Ενεργοποιήστε την ισχύ χωρίς να αγγίξετε το joystick.
		Οι μοχλοί φρένων είναι απελευθερωμένοι.	Κλειδώστε τα φρένα και ενεργοποιήστε ξανά την ισχύ.
		Ο φορτιστής ήταν συνδεδεμένος όταν η ισχύς ήταν ενεργοποιημένη ή η συσκευή ενεργοποιήθηκε ενώ ήταν συνδεδεμένη με τον φορτιστή.	Αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη μπαταρία.
		Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.	Επαναφορτίστε τη μπαταρία.
Η μέγιστη ταχύτητα μειώνεται.		Η θερμοκρασία της μπαταρίας έπεσε σημαντικά.	Αποθηκεύστε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου ή έστω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 0 °C (32 °F) μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να περάσει τους 0 °C (32 °F).
Ανάκτηση της μέγιστης ταχύτητας.		Η θερμοκρασία της μπαταρίας ξεπέρασε τους 0 °C (32 °F).	
Εμφανίζεται το εικονίδιο που φαίνεται στα δεξιά.		Το επίπεδο της μπαταρίας στο έξυπνο κλειδί είναι χαμηλό.	Αντικαταστήστε τη μπαταρία στο έξυπνο κλειδί.
Εμφανίζεται το εικονίδιο που φαίνεται στα δεξιά.		Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε έδαφος με απότομη ανηφορική κλίση.	Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε κλίση που δεν είναι ασφαλής για τον χειρισμό της. Κινηθείτε αργά προς ένα μέρος με ήπια κλίση, ενώ προσέχετε να παραμείνετε ασφαλής. Μόλις ακουστεί ο προειδοποιητικός ήχος, δεν θα επαναληφθεί ξανά για περίπου 2 λεπτά.



- Όταν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε το επίπεδο μπαταρίας και αν η μπαταρία έχει μπει πλήρως μέσα στη θυρίδα. Εάν η συσκευή δεν ξεκινά να λειτουργεί κανονικά, αφαιρέστε τη μπαταρία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από 5 δευτερόλεπτα.