

## Koppelen met uw smartphone-app


Met de app kunnen gebruikers de totale kilometerstand, de afgelegde afstand, het accuniveau en oplaadcycli controleren en de afstandsbedieningsfunctie gebruiken. Gebruikers kunnen het voertuig ook vergrendelen en ontgrendelen.

1. U dient de app van tevoren te installeren. Om de app te installeren gaat u naar de App Store en zoekt u op 'WHILL'. Klik op het blauwe WHILL-logo voor de WHILL Model C2/F-app. (Het grijze logo is voor WHILL Model C.)



2. Om uw voertuig te koppelen, start u de WHILL Model C2/F-app en voert u de volgende codes\* in op het scherm. U kunt ook de QR-code scannen.\*

 11-cijferige alfanumerieke code

 wachtwoord

\*De unieke ID met wachtwoord en de QR-code voor koppelen met de app zijn afgedrukt op een papierstrookje dat u kunt terugvinden in de doos met de armleuningen. Let op: Afhankelijk van uw regio en type smartphone wordt de app mogelijk niet aangeboden of zijn sommige functies niet beschikbaar.

Verzoeken voor reparaties, onderhoud en vervangen van onderdelen worden afgehandeld door de dealer bij wie het voertuig is aangeschaft.

Dealer

Fabrikant WHILL, Inc.

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 140-0002, Japan

## Bedieningshandleiding

# WHILL Model F



Het doel van deze bedieningshandleiding is het geven van instructies voor het gebruik van het voertuig. Om het voertuig veilig te bedienen, dient u deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig te lezen. Wij adviseren u deze handleiding altijd bij de hand te houden.

# 1. Belangrijke voorzorgsmaatregelen

De WHILL Model F is een mobiliteitshulpmiddel. Personen die moeite hebben met de bediening en het gebruik van een elektrische rolstoel, kunnen het voertuig beter niet gebruiken.

- Het maximale draagvermogen van het voertuig is ca. 115 kg (253,5 lb). Dit gewicht betreft zowel de inzittende als eventuele bagage. Zorg ervoor dat het totale gewicht het maximale draagvermogen bij gebruik niet overschrijdt.
- Zorg ervoor dat het voertuig is uitgeschakeld wanneer u in- of uitstapt.
- Houd uw voeten tijdens het rijden op de voetsteun om te voorkomen dat uw voeten of kleding in bewegende onderdelen bekneld raken.
- Vermijd druk verkeer en kleine ruimtes en neem de verkeersregels in acht zodat u veilig rijdt.

## Draag kleding die geschikt is voor rijden met het voertuig.


- Er bestaat risico dat kleding zoals lange sjaals, loszittende broeken, rokken en regenjassen vast komen te zitten in de wielen of andere onderdelen van het voertuig, wat tot letsel kan leiden.
- Als u handschoenen draagt, let dan op dat deze niet vast komen te zitten in onderdelen van het voertuig, zoals bedieningselementen.

## Rijd voorzichtig met het voertuig op de volgende plekken.



Wanneer u over een spoorwegovergang of tramrails rijdt, nadert u de rails in een rechte hoek en steekt u ook zo over.

Zorg ervoor dat het voertuig niet tussen de rails blijft steken.

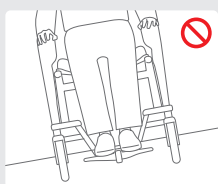


Rij niet op plaatsen waar het voertuig aanzienlijk kan overhellen.

Vermijd spoorwegovergangen en kies wanneer mogelijk voor een veiligere route. Wanneer u een spoorwegovergang moet oversteken, zorg er dan voor dat u weet hoe u de remmen handmatig lost (pag. 4) en vraag iemand u te begeleiden. Rijd niet over zacht terrein, zoals zand, modder, sneeuw of bevroren paden. Er bestaat risico op ongevallen.

● Onveilig in omgevingen met magnetische resonantie (MR). De WHILL Model F is niet veilig in MR-omgevingen. Het voertuig vormt een risico voor projectielwerking.



# 2. Basisinstructies voor bediening

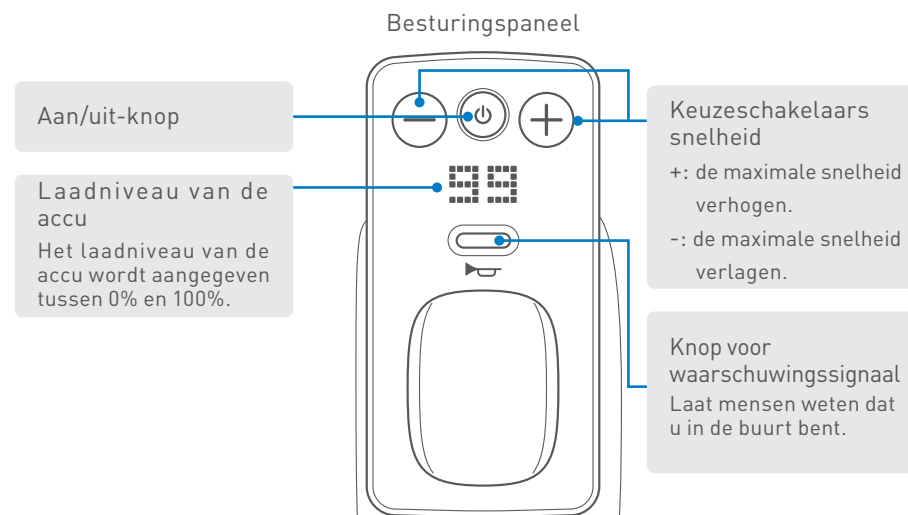

- 1 Ga in het voertuig zitten** Controleer of de voertuigvoeding is uitgeschakeld voordat u in het voertuig stapt.
- 2 Zet het voertuig aan** Druk op de aan/uit-knop en controleer of het display wordt ingeschakeld.
- 3 Stel de snelheid in** Stel de snelheid met behulp van de snelheidsknoppen in op stand 1 tot en met 4.
- 4 Ga rijden en bestuur het voertuig** Beweeg de joystick langzaam in de gewenste richting.
- 5 Stop** Laat de joystick los.
- 6 Zet het voertuig uit** Druk op de aan/uit-knop en controleer of het display wordt uitgeschakeld.
- 7 Stap uit het voertuig** Controleer of het display is uitgeschakeld en stap uit het voertuig.



Zorg ervoor dat het voertuig is uitgeschakeld wanneer u in of uit het voertuig stapt.

## 2. Tips voor rijden Basisinstructies voor bediening

### 1 Het voertuig stoppen

Laat de joystick los om te stoppen. Als u de joystick loslaat, worden de remmen automatisch geactiveerd en stopt het voertuig, ook wanneer u een helling op of af rijdt.

### 2 De joystick vasthouden

Plaats uw vingers op de joystick.



### 3 De joystick bewegen

#### De snelheid instellen

De rijsnelheid van het voertuig wordt geregeld met behulp van de uitslag van de joystick. Zorg er in het begin voor dat u de joystick voorzichtig bedient en langzaam rijdt.




Weinig uitslag = langzaam



Meer uitslag = snel

#### Over een obstakel rijden

Wanneer u over een obstakel rijdt, dient u in een rechte hoek naar het obstakel toe te rijden.

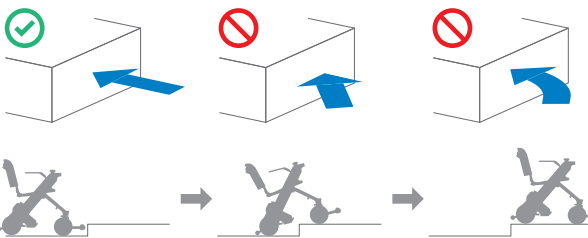

Stop vlak voor het obstakel en vertraag het voertuig wanneer de voorwielen over het obstakel heen zijn.

Stop wanneer de voorwielen tegen het obstakel stoten.

Vertraag wanneer de voorwielen over het obstakel zijn.

Doe hetzelfde voor de achterwielen om het voertuig over het obstakel te rijden.

## 3. De remmen lossen

In sommige situaties moet u het voertuig mogelijk besturen zonder het in te schakelen en zonder de joystick te gebruiken — dit wordt vrijloop genoemd. U kunt dit doen met behulp van de twee rode remvergrendelingen.

Schakel het voertuig uit. Duw de twee remvergrendelingen onder de stoel naar beneden.



Duw beide remvergrendelingen omhoog om de remmen weer in te schakelen.



Los de remmen niet op een helling. Los de remmen alleen wanneer het voertuig op een horizontaal oppervlak staat, of in noodgevallen nadat u de stroom heeft uitgeschakeld. Nadat u het voertuig met de hand heeft verplaatst met ontgrendelde remmen, dient u de twee remvergrendelingen omhoog te zetten om de remmen weer in te schakelen.

## 4. Procedure voor inklappen

Model F is inklapbaar.



- Klap het voertuig alleen in op een egaal, horizontaal oppervlak. Als u dat niet doet, bestaat er risico op ongevallen.
- Klap het voertuig altijd in met aangetrokken remmen. Als u dat niet doet, is er kans dat het voertuig onbedoeld gaat rijden, met mogelijke ongevallen tot gevolg.
- Pak bij het inklappen alleen de handgrepen en onderdelen vast die zijn aangegeven op de foto. Als u dat niet doet, is er risico op verwondingen aan de handen als deze bekneld raken in voertuigdelen.



1 Kantel de rugsteun voorwaarts naar de zitting.



2 Houd het voertuig op zijn plaats terwijl u het voetpedaal met uw voet vasthoudt.



De voetpedaalsteun met twee kantelbeveiligingsrollen voorkomt dat het voertuig kan rollen wanneer het is ingeklapt.



Er bestaat risico op letsel aan uw voet als deze bekneld raakt onder het voetpedaal wanneer u het voertuig inklapt.

3 Druk op de ontgrendelknop.



De ontgrendelknop bevindt zich aan de voorzijde van de rechter voertuigarm. Houd het voertuig in deze stand vast met de ontgrendelknop ingedrukt.

4 Trek de buis van het zittingframe omhoog.



Pak de buis van het zittingframe aan de achterkant van de zitting vast en trek het omhoog terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt.



Haal uw hand weg van de ontgrendelknop wanneer het voertuig begint in te klappen.

5 Sluit het voertuig.



Klap het voertuig dicht tot de stand waar u een klik hoort. Duw ten slotte de buis van het zittingframe nogmaals voorzichtig naar beneden om er zeker van te zijn dat het voertuig correct is vergrendeld en niet open kan gaan.



Controleer of het voertuig correct is vergrendeld nadat het is ingeklapt, om er zeker van te zijn dat het voertuig niet onverwacht uit kan klappen.

# 5. Het voertuig uitklappen



- Klap het voertuig alleen uit op een egaal, horizontaal oppervlak.
- Klap het voertuig altijd uit met aangetrokken remmen.
- Pak bij het uitklappen alleen de handgrepen en onderdelen vast die zijn aangegeven op de foto.

1 Houd het voertuig op zijn plaats terwijl u het voetpedaal met uw voet vasthoudt.



De voetpedaalsteun met twee kantelbeveiligingsrollen voorkomt dat het voertuig kan rollen wanneer het wordt uitgeklapt.

2 Trek de buis van het zittingframe omhoog en druk op de ontgrendelknop.



Pak de buis van het zittingframe aan de achterkant van de zitting vast en trek het omhoog om het voertuig in deze stand vast te houden.



Druk op de ontgrendelknop aan de voorzijde van de rechter voertuigarm.

De ontgrendelknop is zo ontworpen, dat hij alleen kan worden ingedrukt wanneer de buis van het zittingframe omhoog is getrokken.

3 Duw de buis van het zittingframe naar beneden.



Duw de buis van het zittingframe omlaag terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt om het voertuig uit te klappen. Haal uw hand weg van de ontgrendelknop wanneer het voertuig begint uit te klappen.

4 Klap het voertuig uit.



Klap het voertuig uit tot de stand waar u een klik hoort.

5 Kantel de rugsteun naar achteren en controleer de vergrendelingsindicator.



Controleer of de vergrendelingsindicator aan de binnenkant van de rechter voertuigarm zwart is.



Controleer of de vergrendelingsindicator zwart is nadat u het voertuig hebt uitgeklapt, om er zeker van te zijn dat het voertuig niet onbedoeld kan inklappen tijdens het rijden, wat tot een ongeval zou kunnen leiden.

## 6. De accu opladen

### 1 De accu in het voertuig laden

Rijd het voertuig tot vlak bij het stopcontact en schakel de apparaatvoeding uit.  
Sluit het netsnoer aan op de oplader.

Steek de stekker van de oplader in het stopcontact. De indicator oplader gaat rood branden.

Verwijder het kapje van de acculaadpoort en sluit de DC-stekker aan op de  
oplaadpoort. De indicator oplader gaat groen knipperen en het laden begint.

Wanneer de indicator oplader continu groen gaat branden, is de accu volledig opgeladen.

Koppel de DC-stekker los van de accu en trek de stekker van de oplader uit het  
stopcontact. Breng het kapje weer aan op de acculaadpoort.



### 2 De accu buiten het voertuig laden

Controleer of de apparaatvoeding is uitgeschakeld en druk op de ontgrendelknop  
accuvergrendeling.  
Pak het handvat vast en trek eraan om de accu te verwijderen.

Sluit het netsnoer aan op de oplader. Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.

Verwijder het kapje van de acculaadpoort en sluit de DC-stekker erop aan.  
De indicator oplader gaat groen knipperen en het laden begint.

De accu is volledig opgeladen wanneer de indicator oplader en de accu-LED  
continu groen gaan branden.

Koppel de DC-stekker los van de accu en  
trek de stekker daarna uit het stopcontact.



- Om brandwonden te voorkomen, mag u de accu en de oplader tijdens het laden niet aanraken.
- Laad de accu altijd binnenshuis op.
- Gebruik alleen de speciaal voor het voertuig bedoelde accu en oplader.

## 7. Foutopsporing

Bij sommige storingen van het voertuig verschijnt er een foutcode op het LED-scherm. Als er een niet-gespecificeerde fout wordt weergegeven of als het probleem niet kon worden verholpen met de foutopsporing, neem dan contact op met uw dealer of met de klantenservice.

Gedrag van het voertuig	Foutcode	Oorzaak	Oplossing
Het rechts getoonde pictogram wordt weergegeven.		De controller is bediend terwijl het voertuig ingeklapt was.	Ontgrendel het voertuig en schakel het weer in.
		De joystick stond niet in de neutrale stand toen het voertuig werd ingeschakeld.	Zet het voertuig weer aan zonder de joystick aan te raken.
		De remhendels zijn gelost.	Vergrendel de remmen en zet het voertuig weer aan.
		De oplader werd aangesloten terwijl het voertuig was ingeschakeld, of het voertuig werd ingeschakeld toen de lader was aangesloten.	Koppel de oplader los van de accu.
		Het laadniveau van de accu is laag.	Laad de accu op.
De maximale snelheid neemt af.		De accutemperatuur is aanzienlijk gedaald.	Bewaar de accu op kamertemperatuur of bij minimaal 0 °C (32 °F) en gebruik de accu niet als deze kouder dan 0 °C (32 °F) is.
De maximale snelheid herstelt zich.		De accutemperatuur is hoger geworden dan 0 °C (32 °F).	
Het rechts getoonde pictogram wordt weergegeven.		De batterij van de chipsleutel is bijna leeg.	Vervang de batterij van de chipsleutel.
Het voertuig gaat niet aan. Het LED-scherm gaat niet aan.	N.v.t.	Het laadniveau van de accu is laag.	Laad de accu op.
		De accu zit niet goed in het accucompartiment in het achterste wielstel.	Steek de accu volledig in het accucompartiment. Verwijder de accu, wacht 10 seconden en duw de accu dan weer in het compartiment.
		De kabelstekker aan de achterkant van de zitting is losgeschoten.	Sluit de kabelstekker aan.