




WHILL Europe B.V.

Johan Cruijff Boulevard 61,  
1101 DL, Άμστερνταμ,  
Κάτω Χώρες

info@whill-europe.com  
www.whill.inc

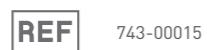

Vol 1.0

\*Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει κινητικότητα σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη χρήση ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου.

\*Το μοντέλο C2 της WHILL ταξινομείται ως αναπηρικό αμαξίδιο κατηγορίας A.



# Move More. Live More.

Βιώστε τον κόσμο με το WHILL και ζήστε τη ζωή χωρίς όρια.

Καινοτόμα προϊόντα κατασκευασμένα να αμφισβητούν την αντίληψη σχετικά με το τι μπορεί να είναι μια συσκευή κινητικότητας.

WHILL Model C2





## Ευκολία

Το Model C2 είναι απλό στον χειρισμό και μπορεί να πραγματοποιεί κλειστές στροφές για να φτάσετε όπου θέλετε να πάτε.



Το καλάθι βρίσκεται σε μια εύχρηστη θέση κάτω από το κάθισμα για να μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε εύκολα τα πράγματά σας.

Διαστάσεις: 24 cm x 29 cm x 43 cm



Ανασπώστε τον βραχίονα για να καθίσετε εύκολα στην καρέκλα από το πλάι. Σταθείτε επάνω στο στήριγμα για τα πόδια για επιπλέον σταθερότητα.



Περιπέτεια με το WHILL - το Model C2 μπορεί να πραγματοποιεί κλειστές στροφές, ώστε να μπορείτε να πάτε σε μέρη που ένα συνηθισμένο σκούτερ δεν μπορεί να σας πάει.



Θέστε σε λειτουργία και προσαρμόστε την ταχύτητα με το ένα χέρι. Η συσκευή θα φρενάρει αυτόματα όταν απελευθερώσετε το χειριστήριο, ακόμα και σε κλίση.






## Ισχυρό

Εντυπωσιακή δύναμη που σας επιτρέπει να δείτε και να κάνετε περισσότερα. Ζήστε τη ζωή που φιλοδοξείτε με το WHILL Model C2.

Βγείτε έξω και ζηστε την περιπέτεια!



Περάστε χωρίς κόπο πάνω από εμπόδια ύψους έως 5 cm με δύο ισχυρούς κινητήρες και μεγάλους μπροστινούς πολυκατευθυντικούς τροχούς.

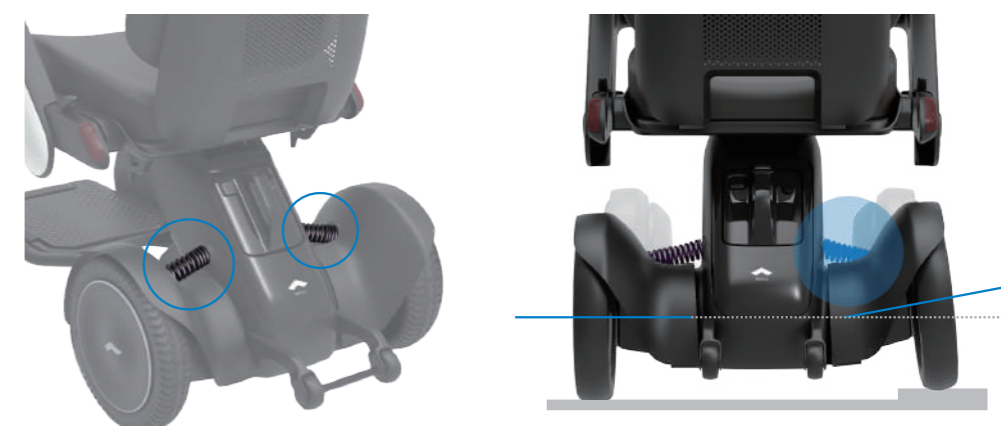

Η ανάρτηση των πίσω τροχών απορροφά τις κρούσεις όταν κινείστε πάνω σε ανώμαλο δρόμο ή εμπόδια.



## Φορητό

Αποσυναρμολογείται σε τέσσερα εύκολα βήματα.

Το Model C2 μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για εύκολη μεταφορά στον χώρο αποσκευών οποιουδήποτε αυτοκινήτου. Είτε κάνετε τα ψώνια σας το Σαββατοκύριακο είτε ταξιδεύετε με την οικογένειά σας, το Model C2 σας επιτρέπει να ζήσετε τη ζωή στο έπακρο.



1 Αφαιρέστε τη μπαταρία.



2 Αнуψώστε τον μοχλό κάτω από το κάθισμα.



3 Τραβήξτε το κάθισμα προς τα πάνω.



4 Τραβήξτε τον μοχλό στο πλάι της μπαταρίας προς το μέρος σας για να διαχωρίσετε τα μέρη.

Διάταξη καθίσματος  
12,9 kg

Μπροστινή βάση κίνησης  
17,6 kg

Πίσω βάση κίνησης  
19,4 kg

Μπαταρία  
2,7 kg



Αποσυναρμολογείται εύκολα για να χωρά στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου σας

\*Η παραπάνω εικόνα χρησιμοποιείται μόνο για επεξηματικούς σκοπούς

## Παραλλαγές χρώματος

Κινηθείτε με στυλ.

Επιλέξτε ανάμεσα σε 8 διαφορετικά χρώματα βραχίονα και προσαρμόστε το Model C2 για να ταιριάζει με το προσωπικό σας στυλ.



Λευκό



Γκρι\*



Μαύρο



Κόκκινο



Ροζ



Μοβ\*



Χρυσό

\*Χρώμα περιορισμένης έκδοσης

Μπλε

## Τα έχουμε σκεφτεί όλα!

Οι παρατηρήσεις των πελατών μας μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε το Model C2. Συνδυάσαμε όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητάτε, συμπεριλαμβανομένου κλειδώματος από απόσταση και της ικανότητας προσαρμογής της μέγιστης ταχύτητας για επιπλέον ασφάλεια.



Πίσω φως

Το πίσω φως είναι εμφανώς ορατό, ακόμα και αν κρέμεται κάποια τσάντα στο στήριγμα πλάτης, ώστε να είστε ασφαλείς στον δρόμο τη νύχτα.

Εμποδίζει την ολίσθηση



Κινηθείτε ευθεία σε διαδρομή με κλίση.

Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά.



Μπαταρία  
Αποσπώμενη μπαταρία.


5

ώρες φόρτισης



Το Model C2 μπορεί να διανύει 18 χιλιόμετρα με φόρτιση 5 ωρών, ώστε να σας παρέχει άπλετη ισχύ για όλη την ημέρα σας.

Εφαρμογή

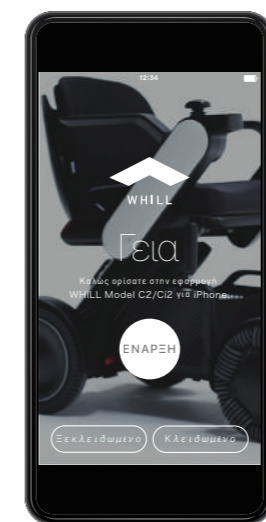

Ελέγξτε τη συνολική χιλιμετρική απόσταση, τη διανυθείσα απόσταση, το επίπεδο μπαταρίας, τους κύκλους πλήρους φόρτισης και κάντε πολλά περισσότερα με την εφαρμογή WHILL\*. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τη μονάδα.

\*Πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα την εφαρμογή



2,7 kg

Υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της μπαταρίας και φόρτισής της σε μια συνηθισμένη οικιακή πρίζα.




Η διαισθητική οθόνη του χειριστηρίου σας επιτρέπει να ελέγχετε τη μονάδα από απόσταση.



Ορίστε τη λειτουργία κίνησης σε «Οικολογική», «Κανονική» ή «Σπορ», ανάλογα με τις ανάγκες σας.

## Η σωστή εφαρμογή

Στο Model C2 μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα από το ύψος του καθίσματος και τη γωνία του στηρίγματος πλάτης έως τη θέση του χειριστηρίου (δεξιό ή αριστερό σύστημα κίνησης) για τη δημιουργία μιας άνετης εμπειρίας οδήγησης.

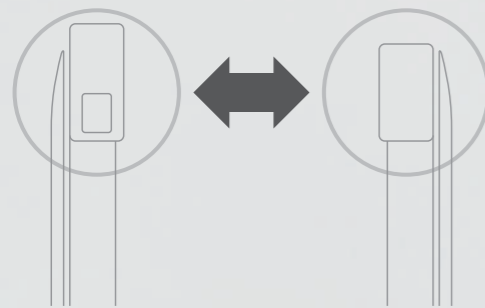

Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά.

1. Υψος χειριστηρίου .....670, 690, 710, 730 mm
2. Γωνία στηρίγματος πλάτης .....90, 95, 100°
3. Υψος στηρίγματος πλάτης.....340 - 460 mm
4. Υψος καθίσματος.....405, 425, 445, 465, 485 mm
5. Γωνία καθίσματος .....5°
6. Βάθος καθίσματος.....400 mm
7. Πλάτος καθίσματος.....400 mm
8. Γωνία στηρίγματος ποδιών.....2°
9. Υψος στηρίγματος ποδιών .....127 mm

Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο δικό σας μαξιλάρι, για λόγους ασφάλειας, να επιλέγετε ένα μαξιλάρι που έχει επαρκείς φλογεπιβραδυντικές ιδιότητες.

## Προδιαγραφές επιδόσεων

Εύρος οδήγησης.....	18 km	Μπαταρία .....	Ιόντων λιθίου (25,3 V x 10,6 Ah)
Μέγιστη ταχύτητα.....	8 km/h	Κύκλοι φόρτισης μπαταρίας .....	~1.000
Σύστημα κίνησης .....	Δικινητήριο σύστημα κίνησης	Βαττώρες μπαταρίας.....	269 Wh
Δυνατότητα κλίσης.....	10°	Συνθήκες λειτουργίας.....	-15 - 40°C
Ακτίνα στρέψης.....	760 mm	Μαξιλάρια καθίσματος.....	400 mm x 400 mm 450 mm x 450 mm
Ύψος αποφυγής εμποδίων .....	50 mm	Πίσω λυχνίες.....	λυχνία LED (κόκκινη)
Απόσταση από το έδαφος.....	57 mm	Κόρνα.....	Ενσωματωμένη, στάθμη ήχου> 65dB
Σύστημα πέδησης.....	Ηλεκτρομαγνητικό	Κατηγορία αναπηρικού αμαξιδίου.....	A
Μέγιστη μεταφορική ικανότητα .....	136 kg		
Συνολικό μήκος (συμπεριλαμβάνεται το υποπόδιο): .....	985 mm		
Συνολικό πλάτος: .....	554 mm		
Συνολικό ύψος: .....	745 - 945 mm		
Διάταξη καθίσματος			
Μήκος: .....	570 mm		
Πλάτος: .....	550, 600, 650 mm		
Ύψος: .....	480 mm		
Πίσω βάση κίνησης			
Μήκος: .....	590 mm		
Πλάτος: .....	554 mm		
Ύψος: .....	300 mm		
Μπροστινή βάση κίνησης			
Μήκος: .....	720 mm		
Πλάτος: .....	554 mm		
Ύψος: .....	270 mm		
Τύπος μπροστινών τροχών: .....	Πολυκατευθυντικός τροχός		
Τύπος πίσω τροχών: .....	Βασικοί τροχοί: Λάστιχο χωρίς αέρα		
Άλλες προδιαγραφές			
Χρόνος φόρτισης.....	5 ώρες		



Σημειώσεις: Η αυτονομία οδήγησης των 18 χιλιομέτρων ποικίλλει λόγω του βάρους του χρήστη, της επιφάνειας οδήγησης, του εδάφους, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της ρύθμισης της ταχύτητας και της φόρτισης και κατάστασης της μπαταρίας.

\*Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως κάθισμα σε αυτοκίνητο ή κάποιο άλλο όχημα.

\*Η κενή συσκευή μπορεί να μεταφέρεται με χερσαία και εναέρια μέσα μεταφοράς.



## Αξεσουάρ

Αγοράστε αξεσουάρ για ακόμα μεγαλύτερη άνεση και εξατομίκευση



### Καλύμματα βραχίονα

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα αγοράζοντας ένα επιπρόσθετο από τα οκτώ χρώματα.

Ζεύγος αριστερού και δεξιού βραχίονα.



### Ζώνη ασφαλείας για τη μέση

Συγκρατεί σταθερά στη θέση καθίσματος ακόμα και σε έδαφος με κλίση.



### Μπαταρία

Αυτή η ελαφριά μπαταρία βάρους 2,7 kg μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εφεδρική μπαταρία.



### Φορτιστής μπαταρίας

Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα σε μια εφεδρική μπαταρία, σας επιτρέπει να περνάτε από τη μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία στην επόμενη πλήρως φορτισμένη μπαταρία για να είστε συνεχώς σε κίνηση.



### Υποδοχή μαστιγονιού

Μαστιγονία σχήματος T, μαστιγονία με λαβή και πατερίτσες μπορούν να στερεωθούν στο κυρίως σώμα.



### Joystick

Μπορείτε να το χειριστείτε πιάνοντάς το με το χέρι σας ή στερεώνοντάς το ανάμεσα στα δάχτυλά σας.

## Προαιρετικό μέρος



### Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη

Προστατεύει τη συσκευή από σκόνη και βρωμιά όταν αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο\*.

\*Δεν είναι αδιάβροχο. Να μην χρησιμοποιείται για προστασία από τη βροχή.



### Τσάντα στο πλάι

Μια πλάινη τσάντα που μπορεί να συνδεθεί στο στήριγμα βραχίονα. Μπορείτε να αποθηκεύετε σημαντικά πράγματα, όπως smartphone και πορτοφόλια κοντά στο σώμα σας. Υπάρχει επίσης μια τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της τσάντας.



### Μαξιλάρι υποβραχιόνιου

Ένα μαξιλάρι με απόδοση απορρόφησης που μπορεί να συνδεθεί με το στήριγμα βραχίονα. Το ύψος του στηρίγματος βραχίονα μπορεί να αυξηθεί έως 3 cm.



Move More.  
Live More.

